

medentis[®]
medical

ICX THE FAIR
PREMIUM
IMPLANT
SYSTEM.



NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY

PLANOWANIE
ZABIEGÓW
CHIRURGIA
PROTETYKA



Medical Smart
Solutions

Wyjaśnienie symboli/znaków na etykietach/etykietach produktów i wkładkach do opakowań:



Numer partii



Proszę uważnie przeczytać instrukcję użytkowania



Numer produktu



Produkty ICX są oznaczone znakiem CE i spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42 EEC



Produkt wysterylizowany promieniowaniem gamma



Data ważności produktu



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Produkt jednorazowego użytku



Nie sterylizować ponownie

Oznaczenie kodowania kolorami wiertel i implantów ICX

Biały ○ = Ø 2,9mm

Czerwony ● = Ø 3,75mm

Różowy ● = Ø 3,3mm

Zielony ● = Ø 4,1mm

Żółty ● = Ø 3,45mm

Niebieski ● = Ø 4,8mm

Prezentowane w broszurze kolory i rozmiary ilustracji nie muszą pokrywać się z oryginalnym produktem!



Medical Smart
Solutions

SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY ICX

dostępny w:



sklep.3z.pl



icx.com.pl



GERMAN
& SWISS
MADE



medentis[®]
medical

Wstęp	6-7
Implanty ICX	9-15
• Implanty ICX Premium	9
• Implanty ICX-Active	10
• Implanty ICX-Active Liquid	11
• Implanty ICX-Diamond	12-13
• Implanty ICX-Tissue Level	14
• Implanty ICX Active-Master Tissue Level	15
Przegląd systemu ICX	16-63
• Kaseta chirurgiczna ICX-ALL-IN-ONE	16-19
• Kaseta chirurgiczna ICX-PREMIUM	20-21
• Kaseta chirurgiczna ICX-ACTIVE-MASTER	22-23
• Tuleje stopujące / poszerzacze kości	24-25
• Śruby zamykające i śruby gojące	26
• Śruby gojące do indywidualizacji / łączniki tymczasowe	27
• ICX-TL TISSUE LEVEL – śruby gojące	28
• CERIX śruby gojące i transfery wyciskowe	29
• Transfery wyciskowe	30
• Analogi	31
• Łączniki tytanowe proste	32-33
• Łączniki kątowe i estetyczne	34-35
• Łączniki jednoczęściowe i uniwersalne	36
• Łączniki do belek, ze złota i do wypalania	37
• Łączniki ICX-PLUS TL	38
• Bazy tytanowe i scan body do prac CAD/CAM	39
• ICX-CEREC® bazy tytanowe do systemu SIRONA®	40
• ICX-MULTI® – do prac przykręcanych 4/6-ON-ICX	41-43
• Łączniki hybrydowe CERIX	44-45
• System kulowy ICX-T-BONA	46-47
• Łączniki ICX-MAXIMUS, klasyczne, jednoczęściowe	48
• Łączniki ICX-MAXIMUS, dwuczęściowe	49
• System ICX-MAXIMUS / LOCATOR akcesoria	50
• CM LOC® system matryc	51
• Kaseta protetyczna	52
• Akcesoria	54-55
• Śruby łączące	56-57
• Zalecane wartości momentów obrotowych dla śrub i implantów	58-61
• Premille	62-63

Technika spawania wewnątrzustnego	64
ICX-Magellan	65
• Kasetta chirurgiczna ICX-Magellan Surgery Box 3.0	66-69
• Protokół wiercenia	70-71
• Zestaw narzędzi do rozszczepiania wyrostka zębodołowego	73
• Szablony implantologiczne	74-75
ICX-Imperial	76-77
Linia ICX-Narrow – przegląd systemu	78-93
• Implanty ICX-Narrow	78-79
• Wiertła ICX-Premium, ICX-Active-Master, ICX-Ø 3.3mm	80-81
• Implanty ICX-BL BONE LEVEL / ICX-TL TISSUE LEVEL	82
• Narzędzia	83
• Śruby gojące i transfery wyciskowe	84
• Łączniki tytanowe	85
• CERIX Łączniki hybrydowe	86
• CERIX Śruby gojące	87
• Łączniki ICX-MULTI 4-ON-ICX / 6-ON-ICX	88-90
• Łączniki T-BONA / ICX-MAXIMUS	91
• ICX-T-BONA system kulowy	92
• ICX-MAXIMUS – akcesoria	93
Implanty ICX-Mini	94
Implanty ICX-White	95
Notatki	96-102



ICX z Niemiec na cały świat

Firma 3Z Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, będąca wyłącznym dystrybutorem systemu implantologicznego na rynku polskim, powstała w roku 2006. Ekspertka wiedza i nabyte przez lata działalności doświadczenie, pozwoliły stworzyć wszechstronną ofertę, która uwzględnia bezpieczne rozwiązania o najwyższej jakości.



Medical Smart
Solutions

Prezes Zarządu 3Z Sp. z o.o.
dr Lothar Kluba M.Sc, M.Sc.

Implanty stomatologiczne najwyższej jakości

Komponenty systemu implantologicznego ICX przed wprowadzeniem na rynek zostają poddane rygorystycznym testom i badaniom dedykowanym wyrobom medycznym.

Wszystkie implanty ICX produkowane są z czystego tytanu IV stopnia, formowanego na zimno, który charakteryzuje się doskonałą biokompatybilnością i jednocześnie bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi.


Piaskowana i wytrawiana powierzchnia implantów ICX charakteryzuje się znakomitymi właściwościami osteointegracyjnymi. Jej mikrostruktura wykazuje lepsze właściwości zwilżające, lepszą przyczepność osteoblastyczną, wyższą jakość i skuteczne wykształcanie się kości wokół implantu.

W 2019 r. system implantologiczny ICX otrzymał prestiżowy certyfikat jakości od Clean Implant Foundation.



Dokument ten potwierdza czystość wyrobu medycznego i daje gwarancję najlepszych wyników klinicznych.



Więcej badań i publikacji naukowych dotyczących implantów ICX, a w tym badania pomiaru mikroszczelin, badania biologiczne in-vivo & in-vitro na stronie: **ICX.COM.PL**

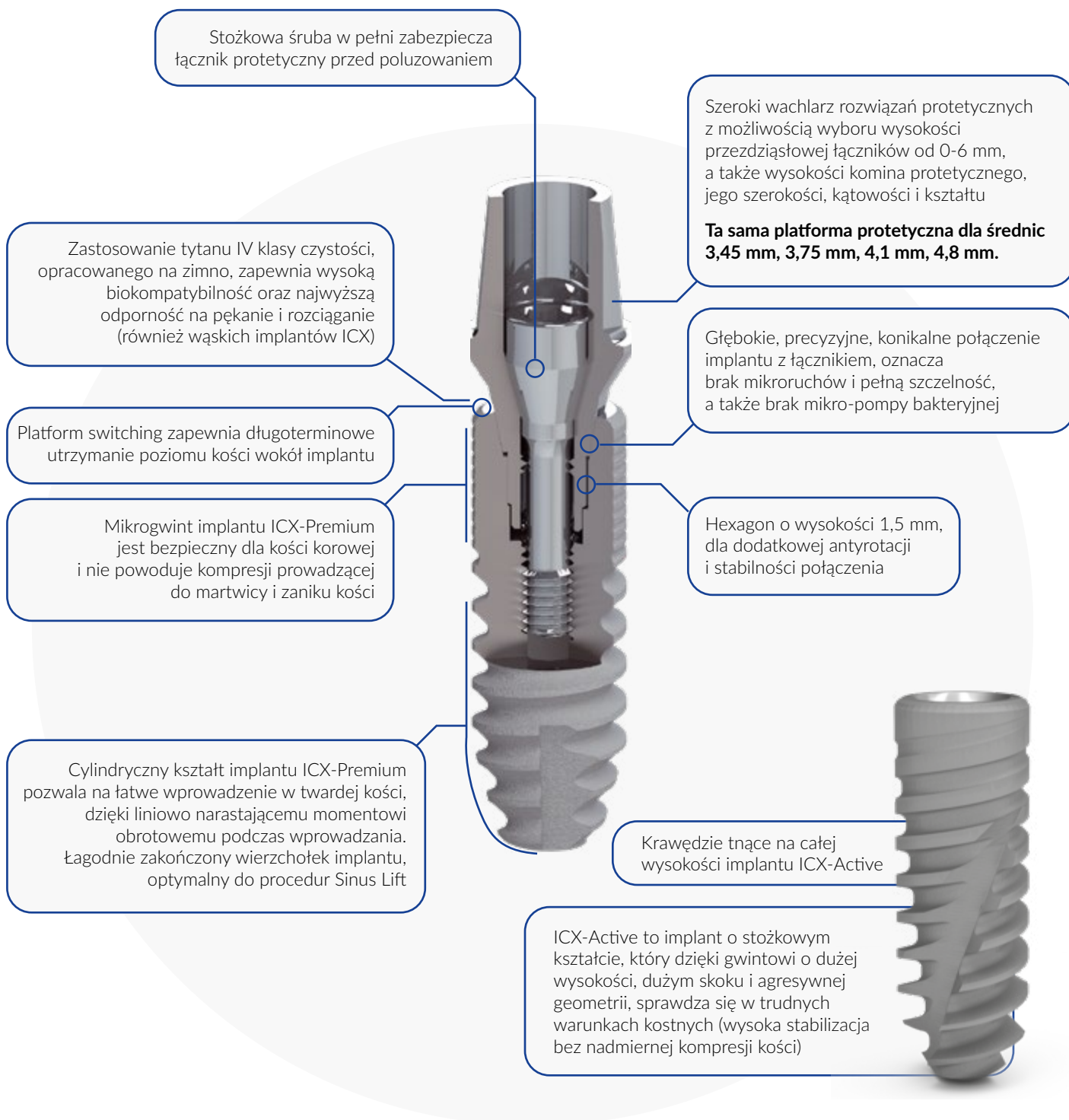

Wysoka hydrofilowość powierzchni.

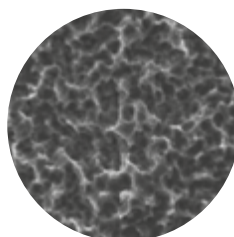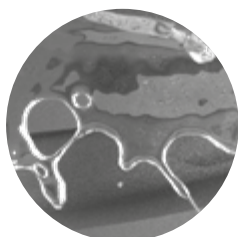

Wysoka mikroporowość powierzchni piaskowanej grubym ziarnem i wytrawianej w kwasach na gorąco, oferuje bardzo dobrą osteointegrację.

Implanty ICX-PREMIUM

ICX-PREMIUM

Uniwersalne implanty przeznaczone do szerokiego spektrum wskazań klinicznych. Mikrozwint w obszarze przyszyjkowym zapewnia znacznie lepsze utrzymanie poziomu kości oraz niweluje przeciążenia i naprężenia wokół implantu podczas jego wprowadzania.




Implanty ICX-PREMIUM (BL) różowe, Ø 3,3mm

Nr artykułu

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 8mm
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 10mm
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

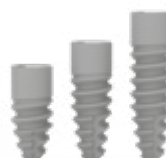


Implanty ICX-PREMIUM (BL) czerwone, Ø 3,75mm

Nr artykułu

C-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm
C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm
C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm
C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm

Ø 3,75mm

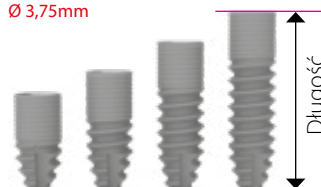


Implanty ICX-PREMIUM (BL) zielone, Ø 4,1mm

Nr artykułu

C-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm
C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm
C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm
C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm

Ø 4,1mm

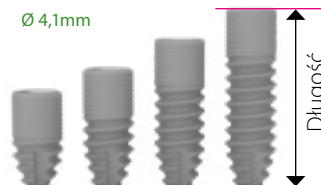


Implanty ICX-PREMIUM (BL) niebieskie, Ø 4,8mm

Nr artykułu

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm

Ø 4,8mm

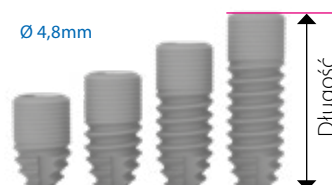



ICX-ACTIVE


Implanty ICX-Active oferują bardzo dużą elastyczność w zakresie implantacji i możliwości odbudowy protetycznej. Dzięki specjalnej geometrii gwintu, każdy obrót ICX-Active w głąb kości powoduje stopniowe jej zagęszczanie. Specjalnie zaprojektowany wierzchołek implantu umożliwia – w razie potrzeby – niewielką korektę w ustawieniu implantu w trakcie wprowadzania.

Implanty ICX-ACTIVE-MASTER (BL) **różowe**, Ø 3,3mm

Nr artykułu

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 8mm
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 10mm
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

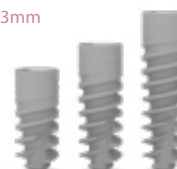


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **czerwone**, Ø 3,75mm

Nr artykułu

S-ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 8mm
S-ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 10mm
S-ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 12,5mm
S-ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 x 15mm

Ø 3,75mm

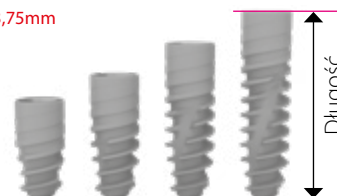


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **zielone**, Ø 4,1mm

Nr artykułu

S-ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 8mm
S-ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 10mm
S-ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 12,5mm
S-ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 x 15mm

Ø 4,1mm

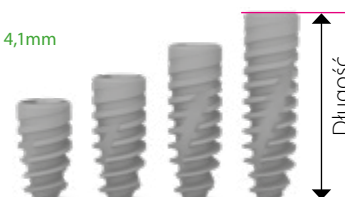


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER **niebieskie**, Ø 4,8mm

Nr artykułu

S-ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm
S-ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm
S-ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm
S-ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm

Ø 4,8mm

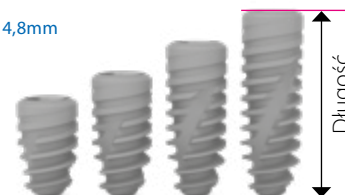

ICX-ACTIVE LIQUID

Implanty posiadające hydrofilową mikrostrukturę powierzchni, dzięki przechowywaniu w sterylnym roztworze soli fizjologicznej. Taki sposób przechowywania zapewnia przyspieszoną integrację powierzchni implantu z kością oraz wzrost stabilności na najwcześniejszych etapach gojenia. Czas gojenia ulega skróceniu.

Nr artykułu	IMPLANTY ICX-ACTIVE LIQUID tylko w opakowaniach zbiorczych 6 szt.
LAC-330080	Ø 3.3mm x 8mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-330100	Ø 3.3mm x 10mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-330125	Ø 3.3mm x 12.5mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-390080	Ø 3.75mm x 8mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-390100	Ø 3.75mm x 10mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-390125	Ø 3.75mm x 12.5mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-390150	Ø 3.75mm x 15mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-425080	Ø 4.1mm x 8mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-425100	Ø 4.1mm x 10mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-425125	Ø 4.1mm x 12.5mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-425150	Ø 4.1mm x 15mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-480080	Ø 4.8mm x 8mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-480100	Ø 4.8mm x 10mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-480125	Ø 4.8mm x 12.5mm x 6, ICX-Active Liquid Implant
LAC-480150	Ø 4.8mm x 15mm x 6, ICX-Active Liquid Implant

Nr artykułu	IMPLANTY ICX-ACTIVE LIQUID tylko w opakowaniach pojedynczych ze śrubą zamykającą
S-LAC-330080	Ø 3.3mm x 8mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-330100	Ø 3.3mm x 10mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-330125	Ø 3.3mm x 12.5mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-390080	Ø 3.75mm x 8mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-390100	Ø 3.75mm x 10mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-390125	Ø 3.75mm x 12.5mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-390150	Ø 3.75mm x 15mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-425080	Ø 4.1mm x 8mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-425100	Ø 4.1mm x 10mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-425125	Ø 4.1mm x 12.5mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-425150	Ø 4.1mm x 15mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-480080	Ø 4.8mm x 8mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-480100	Ø 4.8mm x 10mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-480125	Ø 4.8mm x 12.5mm, ICX-Active Liquid Implant
S-LAC-480150	Ø 4.8mm x 15mm, ICX-Active Liquid Implant



ICX-DIAMOND LIQUID

Implanty łączące zalety technicznie czystego tytanu z wytrzymałością Ti 6Al-4V ELI. Połączenie wytrzymałości i doskonałej kompatybilności z organizmem, bez konieczności godzenia się na utratę którejkolwiek z tych właściwości.

Implanty ICX-DIAMOND LIQUID posiadają hydrofilową, mikrostrukturalną powierzchnię. Implanty te zapewniają wysoką stabilność pierwotną nawet w niekorzystnych warunkach kostnych, optymalną ochronę tkanek miękkich i kości oraz możliwość adaptacyjnego ustawienia implantu.



IMPLANTY ICX-DIAMOND	
tylko w opakowaniach zbiorczych 6 szt.	
Nr artykułu	
G-001-330080	Ø 3.3x8mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-330100	Ø 3.3x10mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-330125	Ø 3.3x12.5mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-390080	Ø 3.75x8mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-390100	Ø 3.75x10mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-390125	Ø 3.75x12.5mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-390150	Ø 3.75x15mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-425080	Ø 4.1x8mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-425100	Ø 4.1x10mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-425125	Ø 4.1x12.5mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-425150	Ø 4.1x15mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-480080	Ø 4.8x8mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-480100	Ø 4.8x10mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-480125	Ø 4.8x12.5mm ICX-Diamond Premium BL Implant
G-001-480150	Ø 4.8x15mm ICX-Diamond Premium BL Implant
GAM-001-330080	Ø 3.3x8mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-330100	Ø 3.3x10mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-330125	Ø 3.3x12.5mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-390080	Ø 3.75x8mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-390100	Ø 3.75x10mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-390125	Ø 3.75x12.5mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-390150	Ø 3.75x15mm ICX-Diamond Active Master BL Implant

Implanty ICX-DIAMOND LIQUID

WŁAŚCIWOŚCI ICX-DIAMOND LIQUID:

- Zastosowanie Giga-Tytanu powoduje większą wytrzymałość na rozciąganie niż zastosowanie tytanu z klasy 4,
- Chemicznie czysty tytan,
- Hydrofilowa i mikrostrukturalna powierzchnia implantu,
- Implant dostępny w wymiarach implantów ICX-Premium, ICX-Active Master, ICX-Tissue Level oraz kompatybilny protetycznie.



Nr artykułu	IMPLANTY ICX-DIAMOND tylko w opakowaniach zbiorczych 6 szt.
GAM-001-425080	Ø 4.1x8mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-425100	Ø 4.1x10mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-425125	Ø 4.1x12.5mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-425150	Ø 4.1x15mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-480080	Ø 4.8x8mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-480100	Ø 4.8x10mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-480125	Ø 4.8x12.5mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GAM-001-480150	Ø 4.8x15mm ICX-Diamond Active Master BL Implant
GT-001-345065	Ø 3.45x6.5mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GT-001-345080	Ø 3.45x8mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GT-001-345100	Ø 3.45x10mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GT-001-345125	Ø 3.45x12.5mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GT-001-390125	Ø 3.75x12.5mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GT-001-425125	Ø 4.1x12.5mm ICX-Diamond Premium TL Implant
GTAM-001-330080	Ø 3.3x8mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-330100	Ø 3.3x10mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-330125	Ø 3.3x12.5mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-390080	Ø 3.75x8mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-390100	Ø 3.75x10mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-390125	Ø 3.75x12.5mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-425080	Ø 4.1x8mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-425100	Ø 4.1x10mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-425125	Ø 4.1x12.5mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-480080	Ø 4.8x8mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-480100	Ø 4.8x10mm ICX-Diamond Active Master TL Implant
GTAM-001-480125	Ø 4.8x12.5mm ICX-Diamond Active Master TL Implant



ICX-TISSUE-LEVEL

Implanty z gładką, polerowaną powierzchnią szyjkową.
Szczególnie wskazane do prac estetycznych i odpowiednie
do klasycznych procedur jednoetapowych.




IMPLANTY ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL

Implanty ICX-PREMIUM (TL) różowe, Ø 3,3mm

Nr artykułu


T-001-330080	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 8mm
T-001-330100	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 10mm
T-001-330125	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 12.5mm

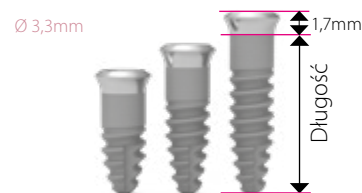

Implanty ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL żółte, Ø 3,45mm

Nr artykułu


C-001-345065	ICX-plus Ø 3.45 x 6.5mm
C-001-345080	ICX-plus Ø 3.45 x 8mm
C-001-345100	ICX-plus Ø 3.45 x 10mm
C-001-345125	ICX-plus Ø 3.45 x 12.5mm

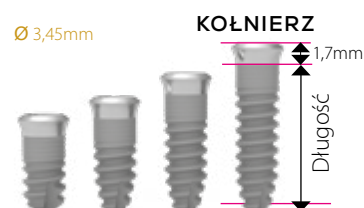

Implanty ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL czerwone, Ø 3,75mm

Nr artykułu


T-001-375080	ICX Premium TissueLine Implant Ø 3.75 x 8mm
T-001-375100	ICX Premium TissueLine Implant Ø 3.75 x 10mm
T-001-375125	ICX Premium TissueLine Implant Ø 3.75 x 12.5mm

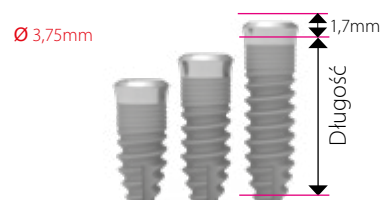

Implanty ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL zielone, Ø 4,1mm

Nr artykułu

T-001-425080	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.1 x 8mm
T-001-425100	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.1 x 10mm
T-001-425125	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.1 x 12.5mm

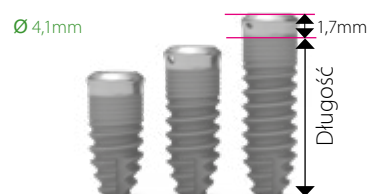

Implanty ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL niebieskie, Ø 4,8mm

Nr artykułu


T-001-480049	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.8 x 4.9mm
T-001-480065	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.8 x 6.5mm
T-001-480080	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.8 x 8mm
T-001-480100	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.8 x 10mm
T-001-480125	ICX Premium TissueLine Implant Ø 4.8 x 12.5mm



IMPLANTY ICX-ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL


Implanty ICX-ACTIVE-MASTER (TL) **różowe, Ø 3,3mm**

Nr artykułu	
TAM-001-330080	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 8mm
TAM-001-330100	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 10mm
TAM-001-330125	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 12.5mm

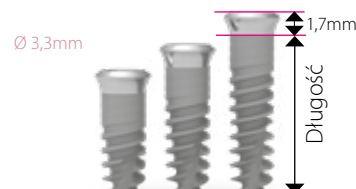


Implanty ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL **czerwone, Ø 3,75mm**

Nr artykułu	
TAM-001-375080	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 3.75 x 8mm
TAM-001-375100	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 3.75 x 10mm
TAM-001-375125	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 3.75 x 12.5mm

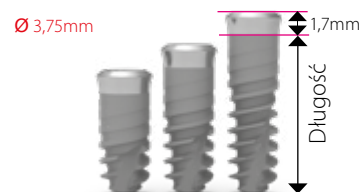


Implanty ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL **zielone, Ø 4,1mm**

Nr artykułu	
TAM-001-425080	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.1 x 8mm
TAM-001-425100	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.1 x 10mm
TAM-001-425125	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.1 x 12.5mm

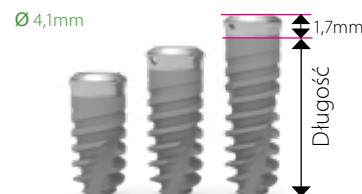

Implanty ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL **niebieskie, Ø 4,8mm**

Nr artykułu	
TAM-001-480080	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.8 x 8mm
TAM-001-480100	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.8 x 10mm
TAM-001-480125	ICX Active Master TissueLine Implant Ø 4.8 x 12.5mm

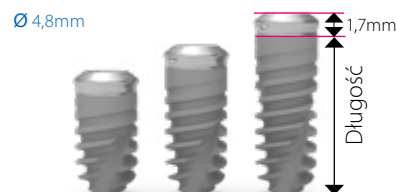

Uwaga przy zamawianiu łączników protetycznych GH 0 mm:

Implanty ICX-Tissue Level (TL), ze względu na kołnierзовą budowę mają inny kształt platformy protetycznej względem implantów ICX Bone Level (BL).

Rodzaje łączników protetycznych są wyraźnie zaznaczone w katalogu.


KASETA CHIRURGICZNA ICX-ALL-IN-ONE

Kompletna kasetta chirurgiczna zawierająca zestaw wiertel i narzędzi do przeprowadzenia zabiegów implanto-protetycznych systemu ICX, ICX-Narrow oraz ICX-Tissue. Innowacja wśród kaset. Zawiera specjalnie zaprojektowane wiertła chirurgiczne, które umożliwiają zarówno standardowe nawiercanie jak i zagęszczenie kości wokół łoża przy zastosowaniu wstecznych obrotów.




Wiertła posiadają wbudowane stopery uwzględniające subkrestalne pozycjonowanie implantu, a także poprzeczne krawędzie tnące dla szybszego przygotowania łoża bez przegrzewania kości.

**Wiertło
możemy używać
na dwa sposoby:**

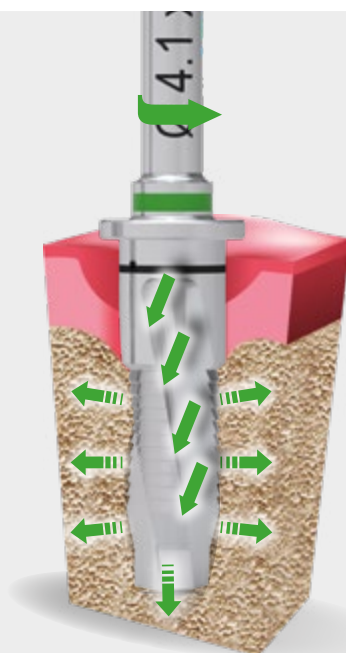

Tryb Zagęszczania

Następuje, gdy wiertło obraca się odwrotnie do wskazówek zegara (50-150 obr./min).

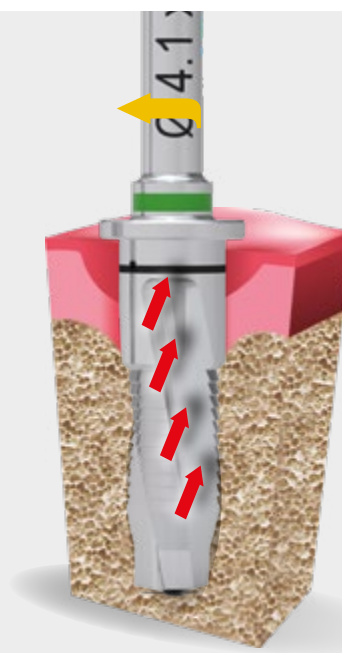

Tryb Cięcia

Następuje, kiedy wiertło kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (400-800 obr./min).



W każdej kasce ICX standardowo znajduje się klucz dynamometryczny oraz śrubokręty protetyczne i narzędzia do obsługi wszystkich implantów ICX.

ICX-ALL-IN-ONE – WIERTŁA CHIRURGICZNE

Nr artykułu	Wiertła ICX-ALL-IN-ONE	Opis	
AIO-014-004330		ICX ALL-IN-ONE wiertło gwintujące – różowe Ø 3.3	●
AIO-014-004375		ICX ALL-IN-ONE wiertło gwintujące – czerwone Ø 3.75	●
AIO-014-004410		ICX ALL-IN-ONE wiertło gwintujące – zielone Ø 4.1	●
AIO-014-004480		ICX ALL-IN-ONE wiertło gwintujące – niebieskie Ø 4.8	●
AIO-014-007290		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – białe Ø 2.9	○
AIO-014-007330		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – różowe Ø 3.3	●
AIO-014-007345		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – żółte Ø 3.45	●
AIO-014-007375		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – czerwone Ø 3.75	●
AIO-014-007410		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – zielone Ø 4.1	●
AIO-014-007480		ICX ALL-IN-ONE wiertło do kości twardej – niebieskie Ø 4.8	●
AIO-014-200000		ICX ALL-IN-ONE wiertło pilotujące	
AIO-014-290080		ICX ALL-IN-ONE – białe Ø 2.9 x 8mm	○
AIO-014-290100		ICX ALL-IN-ONE – białe Ø 2.9 x 10mm	○
AIO-014-290125		ICX ALL-IN-ONE – białe Ø 2.9 x 12.5mm	○
AIO-014-330080		ICX ALL-IN-ONE – różowe Ø 3.3 x 8mm	●
AIO-014-330100		ICX ALL-IN-ONE – różowe Ø 3.3 x 10mm	●
AIO-014-330125		ICX ALL-IN-ONE – różowe Ø 3.3 x 12.5mm	●
AIO-014-345065		ICX ALL-IN-ONE – żółte Ø 3.45 x 6.5mm	●
AIO-014-345080		ICX ALL-IN-ONE – żółte Ø 3.45 x 8mm	●
AIO-014-345100		ICX ALL-IN-ONE – żółte Ø 3.45 x 10mm	●

Nr artykułu	Wiertła ICX-ALL-IN-ONE	Opis	
AIO-014-345125		ICX ALL-IN-ONE – żółte Ø 3.45 x 12.5mm	
AIO-014-375080		ICX ALL-IN-ONE – czerwone Ø 3.75 x 8mm	
AIO-014-375100		ICX ALL-IN-ONE – czerwone Ø 3.75 x 12.5mm	
AIO-014-375125		ICX ALL-IN-ONE – czerwone Ø 3.75 x 12.5mm	
AIO-014-375150		ICX ALL-IN-ONE – czerwone Ø 3.75 x 15mm	
AIO-014-410080		ICX ALL-IN-ONE – zielone Ø 4.1 x 8mm	
AIO-014-410100		ICX ALL-IN-ONE – zielone Ø 4.1 x 12.5mm	
AIO-014-410125		ICX ALL-IN-ONE – zielone Ø 4.1 x 12.5mm	
AIO-014-410150		ICX ALL-IN-ONE – zielone Ø 4.1 x 15mm	
AIO-014-480049		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 4.9mm	
AIO-014-480065		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 6.5mm	
AIO-014-480080		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 8mm	
AIO-014-480100		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 12.5mm	
AIO-014-480125		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 12.5mm	
AIO-014-480150		ICX ALL-IN-ONE – niebieskie Ø 4.8 x 15mm	
C-018-100001		ICX All-in-one kaseta chirurgiczna kompletna	

KASETA CHIRURGICZNA ICX-PREMIUM

Kompletna kasetka chirurgiczna zawierająca zestaw wiertel i narzędzi do przeprowadzenia zabiegów implanto-protetycznych systemu ICX, ICX-Narrow oraz ICX-Tissue. Wyposażona jest we wszystkie narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego z użyciem każdej długości i średnicy implantów systemu ICX oraz ICX-Narrow. Logiczne ułożenie narzędzi oraz oznaczenia kodem kolorów zapewniają intuicyjną i ergonomiczną pracę.



W każdej kasce ICX standardowo znajduje się klucz dynamometryczny oraz śrubokręty protetyczne i narzędzia do obsługi wszystkich implantów ICX.

Nr artykułu **ICX-PREMIUM Kasetka chirurgiczna kompletna**

C-018-100003 ICX-PREMIUM Kasetka chirurgiczna kompletna

Wiertła ICX-PREMIUM Ø 3,3mm

Nr artykułu	Wiertła ICX-PREMIUM Ø 3.3	Opis
C-014-003330		ICX-PREMIUM wiertło do kości miękkiej Ø 3.3 różowe I pierścień
C-014-006330		ICX-PREMIUM wiertło do kości regularnej Ø 3.3 różowe II pierścień
C-014-007330		ICX-PREMIUM wiertło do kości twardej Ø 3.3 różowe III pierścień
C-014-005330		ICX-PREMIUM wiertło stopujące Ø 3.3 różowe

Nr artykułu	Wiertła ICX-PREMIUM	Opis	
C-014-000003		ICX frez do modelowania kości wyrostka	
FIL-186RF		ICX wiertło pilotujące do kości kortykalnej	
C-014-006290		ICX wiertło białe Ø 2.9 do kości średniej II	○
C-014-007290		ICX wiertło białe Ø 2.9 do kości twardej III	○
C-014-003345		ICX-plus wiertło żółte Ø 3.45 do kości miękkiej I	●
C-014-006345		ICX-plus wiertło żółte Ø 3.45 do kości średniej II	●
C-014-007345		ICX-plus wiertło żółte Ø 3.45 do kości twardej III	●
C-014-003375		ICX wiertło czerwone Ø 3.75 do kości miękkiej I	●
C-014-006375		ICX wiertło czerwone Ø 3.75 do kości średniej II	●
C-014-007375		ICX wiertło czerwone Ø 3.75 do kości twardej III	●
C-014-003410		ICX wiertło zielone Ø 4.1 do kości miękkiej I	●
C-014-006410		ICX wiertło zielone Ø 4.1 do kości średniej II	●
C-014-007410		ICX wiertło zielone Ø 4.1 do kości twardej III	●
C-014-003480		ICX wiertło niebieskie Ø 4.8 do kości miękkiej I	●
C-014-006480		ICX wiertło niebieskie Ø 4.8 do kości średniej II	●
C-014-007480		ICX wiertło niebieskie Ø 4.8 do kości twardej III	●
C-014-005345		ICX wiertło do kości kortykalnej Ø 3.45 żółte	●
C-014-005375		ICX wiertło do kości kortykalnej Ø 3.75 czerwone	●
C-014-005410		ICX wiertło do kości kortykalnej Ø 4.1 zielone	●
C-014-005480		ICX wiertło do kości kortykalnej Ø 4.8 niebieskie	●

KASETA CHIRURGICZNA ACTIVE-MASTER

Kompletna kasetka chirurgiczna zawierająca zestaw wiertel i narzędzi do przeprowadzenia zabiegów implanto-protetycznych systemu ICX-Active Master, ICX-Active Master Narrow oraz ICX-Active Master Tissue Level. Logiczne ułożenie narzędzi oraz oznaczenia kodem kolorów zapewniają intuicyjną i ergonomiczną pracę.



W każdej kasce ICX standardowo znajduje się klucz dynamometryczny oraz śrubokręty protetyczne i narzędzia do obsługi wszystkich implantów ICX.

ICX-ACTIVE-MASTER Kasetka chirurgiczna

Nr artykułu **ICX-ACTIVE-MASTER kasetka chirurgiczna kompletna**

ACM-018-000006

ICX-ACTIVE-MASTER
kasetka chirurgiczna kompletna



Wiertła ICX-ACTIVE-MASTER

Nr artykułu	Wiertła ICX-ACTIVE-MASTER	Opis
ACM-014-003290		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło pilotujące
ACM-014-003375		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 3.75 do kości miękkiej czerwone I
ACM-014-006375		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 3.75 do kości średniej czerwone II
ACM-014-007375		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 3.75 do kości twardej czerwone III
ACM-014-003410		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.1 do kości miękkiej zielone I
ACM-014-006410		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.1 do kości średniej zielone II
ACM-014-007410		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.1 do kości twardej zielone III
ACM-014-003480		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.8 do kości miękkiej niebieskie I
ACM-014-006480		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.8 do kości średniej niebieskie II
ACM-014-007480		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło Ø 4.8 do kości twardej niebieskie III
ACM-014-004375		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło gwintujące dla Ø 3.75 czerwone
ACM-014-004410		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło gwintujące dla Ø 4.1 zielone
ACM-014-004480		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło gwintujące dla Ø 4.8 niebieskie
ACM-014-005375		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości korykalnej Ø 3.75 czerwone
ACM-014-005410		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości korykalnej Ø 4.1 zielone
ACM-014-005480		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości korykalnej Ø 4.8 niebieskie

Wiertła ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm

Nr artykułu	WIERTŁA ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3	Opis
ACM-014-003330		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości miękkiej Ø 3.3 różowe I pierścień
ACM-014-006330		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości regularnej Ø 3.3 różowe II pierścienie
ACM-014-007330		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło do kości twardej Ø 3.3 różowe III pierścienie
ACM-014-005330		ICX-ACTIVE-MASTER wiertło stopujące Ø 3.3 różowe

Symbol	Opis	Materiał	
C-027-129049	ICX tuleja stopująca Ø 2,9mm, 4,9mm ○ BIAŁA	Tytan	Ø 2,9mm 
C-027-129065	ICX tuleja stopująca Ø 2,9mm, 6,5mm ○ BIAŁA	Tytan	
C-027-129080	ICX tuleja stopująca Ø 2,9mm, 8mm ○ BIAŁA	Tytan	
C-027-129100	ICX tuleja stopująca Ø 2,9mm, 10mm ○ BIAŁA	Tytan	
C-027-129125	ICX tuleja stopująca Ø 2,9mm, 12,5mm ○ BIAŁA	Tytan	
C-027-135049	ICX tuleja stopująca Ø 3,45mm, 4,9mm ● ŻÓŁTA	Tytan	Ø 3,3mm Ø 3,45mm  Nadaje się również do ICX-Ø 3,3mm NARROW
C-027-135065	ICX tuleja stopująca Ø 3,45mm, 6,5mm ● ŻÓŁTA	Tytan	
C-027-135080	ICX tuleja stopująca Ø 3,45mm, 8mm ● ŻÓŁTA	Tytan	
C-027-135100	ICX tuleja stopująca Ø 3,45mm, 10mm ● ŻÓŁTA	Tytan	
C-027-135125	ICX tuleja stopująca Ø 3,45mm, 12,5mm ● ŻÓŁTA	tytan	
C-027-138049	ICX tuleja stopująca Ø 3,75mm, 4,9mm ● CZERWONA	Tytan	Ø 3,75mm 
C-027-138065	ICX tuleja stopująca Ø 3,75mm, 6,5mm ● CZERWONA	Tytan	
C-027-138080	ICX tuleja stopująca Ø 3,75mm, 8mm ● CZERWONA	Tytan	
C-027-138100	ICX tuleja stopująca Ø 3,75mm, 10mm ● CZERWONA	Tytan	
C-027-138125	ICX tuleja stopująca Ø 3,75mm, 12,5mm ● CZERWONA	Tytan	
C-027-141049	ICX tuleja stopująca Ø 4,1mm, 4,9mm ● ZIELONA	Tytan	Ø 4,1mm 
C-027-141065	ICX tuleja stopująca Ø 4,1mm, 6,5mm ● ZIELONA	Tytan	
C-027-141080	ICX tuleja stopująca Ø 4,1mm, 8mm ● ZIELONA	Tytan	
C-027-141100	ICX tuleja stopująca Ø 4,1mm, 10mm ● ZIELONA	Tytan	
C-027-141125	ICX tuleja stopująca Ø 4,1mm, 12,5mm ● ZIELONA	Tytan	

ICX tuleje stopujące / ICX poszerzacze kości

Symbol	Opis	Materiał
C-027-148049	ICX tuleja stopująca Ø 4,8mm, 4,9mm ● NIEBIESKA	Tytan
C-027-148065	ICX tuleja stopująca Ø 4,8mm, 6,5mm ● NIEBIESKA	Tytan
C-027-148080	ICX tuleja stopująca Ø 4,8mm, 8mm ● NIEBIESKA	Tytan
C-027-148100	ICX tuleja stopująca Ø 4,8mm, 10mm ● NIEBIESKA	Tytan
C-027-148125	ICX tuleja stopująca Ø 4,8mm, 12,5mm ● NIEBIESKA	Tytan

Ø 4,8mm



Symbol	Opis	Materiał
C-018-000016	ICX kaseta na tuleje stopujące (bez zawartości)	Tworzywo, do sterylizacji
C-018-000017	ICX kaseta na tuleje stopujące (zawiera 25 tytanowych tulei)	Tworzywo, do sterylizacji

JAK WŁAŚCIWIE WYJMOWAĆ TULEJĘ STOPUJĄCĄ Z KASETY:

Krok 1



Krok 2



Krok 3



ICX śruby zamykające i śruby gojące

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał	
C-003-000001	ICX śruba zamykająca	GH 0mm	Tytan	
C-003-000002	ICX śruba zamykająca, jałowa	GH 0mm	Tytan	
C-003-000021	ICX śruba zamykająca, niebieska Ø 3.1mm	GH 2mm	Tytan	
C-003-000022	ICX śruba zamykająca niebieska Ø 3.75mm	GH 0,5mm	Tytan	
C-004-444720	ICX śruba gojąca butelkowa Ø 4.7/3.9mm	GH 2mm L 3,5mm	Tytan	Ø 4,7/3,9mm
C-004-444730	ICX śruba gojąca butelkowa Ø 4.7/3.9mm	GH 3mm L 4,5mm	Tytan	
C-004-444740	ICX śruba gojąca butelkowa Ø 4.7/3.9mm	GH 4mm L 5,5mm	Tytan	
C-004-444750	ICX śruba gojąca butelkowa Ø 4.7/3.9mm	GH 5mm L 6,5mm	Tytan	
C-004-004510	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 1mm	Tytan	Ø 4,7mm
C-004-004520	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 2mm	Tytan	
C-004-004530	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 3mm	Tytan	
C-004-004540	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 4mm	Tytan	
C-004-004550	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 5mm	Tytan	Ø 6mm
C-004-004560	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 4.7mm	GH 6mm	Tytan	
C-004-006020	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 6mm	GH 2mm	Tytan	
C-004-006030	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 6mm	GH 3mm	Tytan	
C-004-006040	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 6mm	GH 4mm	Tytan	Ø 8mm
C-004-006050	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 6mm	GH 5mm	Tytan	
C-004-006060	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 6mm	GH 6mm	Tytan	
C-004-008030	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 8mm	GH 3mm	Tytan	
C-004-008050	ICX śruba gojąca stożkowa Ø 8mm	GH 5mm	Tytan	

Uwaga: Nie należy przekraczać **momentu dokręcania od 5 do 10 Ncm**. Wszystkie śruby zamykające i śruby gojące ICX należy wkręcać wyłącznie ręcznie. Jeśli zostanie użyta siła 20 Ncm lub więcej, to istnieje ryzyko powstania sił stożkowych, które uniemożliwią ich późniejsze odkręcenie.

Objaśnienie: L = Wysokość od krawędzi implantu
GH = Wysokość słuzówki

ICX śruby gojące do indywidualizacji / łączniki tymczasowe

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał	
C-004-504720	ICX łącznik tymczasowy z hex, Ø 4.7mm	GH 2mm K 6mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-504740	ICX łącznik tymczasowy z hex, Ø 4.7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-514720	ICX łącznik tymczasowy bez hex, Ø 4.7mm	GH 2mm K 6mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-514740	ICX łącznik tymczasowy bez hex, Ø 4.7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-524706	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 5mm	L 6,5mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-524708	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 5mm	L 8,5mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-524710	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 5mm	L 10,5mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-526006	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 7mm	L 6,5mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-526008	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 7mm	L 8,5mm	PEEK, do sterylizacji	
C-004-526010	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex, Ø 7mm	L 10,5mm	PEEK, do sterylizacji	

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał	
C-004-034550	ICX śruba gojąca do indywidualizacji z hex tylko dla TISSUE LEVEL (TL)	Ø 5mm L 5mm	PEEK, do sterylizacji	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą C-011-000001

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał	
C-003-000100	ICX zestaw do techniki ringowej, zawiera śubę zamykającą oraz pierścień blokujący	GH 0mm	Tytan	
C-015-100030	ICX-MULTI klucz sześciokątny 1.2mm średni	SW 1,2mm	Stal chirurgiczna	

Objaśnienie: GH = Wysokość ślizówki
K = Wysokość części preparacyjnej (komina protetycznego)
L = Wysokość od krawędzi implantu

ICX-TL TISSUE LEVEL – śruby gojące

Symbol		Wymiary	Materiał	
G-004-245010	ICX-TL śruba gojąca stożkowa	Ø 5mm 1mm GH	Tytan	
G-004-245020	ICX-TL śruba gojąca stożkowa	Ø 5mm 2mm GH	Tytan	
G-004-245030	ICX-TL śruba gojąca stożkowa	Ø 5mm 3mm GH	Tytan	
G-004-245040	ICX-TL śruba gojąca stożkowa	Ø 5mm 4mm GH	Tytan	
G-004-245060	ICX-TL śruba gojąca stożkowa	Ø 5mm 6mm GH	Tytan	



Opis produktu:

ICX-TL śruba gojąca stożkowa

- tworzy rozszerzony profil wytłaniania dla wszystkich kolejnych uzupełnień na łącznikach i bazach tytanowych od GH 0mm,
- chroni kołnierzową platformę implantów TL podczas procesu gojenia,
- licuje się ze stopniem implantu.



CERICX śruby gojące i transfery wyciskowe

Dla precyzyjnie dopasowanego profilu wytłaniania do łączników CERICX, odpowiednio uformowanej śluzówki i późniejszego wycisku. Dzięki temu, otrzymujemy kompletny system.

Symbol		Wymiary	Materiał	
G-004-116001	CERICX śruba gojąca, pasuje do łącznika CERICX prosty, 1mm C-036-A/B/C10501	Ø 6mm GH 3mm	Tytan	
G-004-116002	CERICX śruba gojąca, pasuje do łącznika CERICX prosty, 2mm C-036-A/B/C10502	Ø 6mm GH 4mm	Tytan	
G-004-116003	CERICX śruba gojąca, pasuje do łącznika CERICX prosty, 3mm C-036-A/B/C10503	Ø 6mm GH 5mm	Tytan	
G-004-116004	CERICX śruba gojąca, pasuje do łącznika CERICX prosty, 4mm C-036-A/B/C10504	Ø 6mm GH 6mm	Tytan	
G-005-020005	CERICX transfer wyciskowy, zamknięty, 3-częściowy	Ø 7mm L 13mm	Tytan	
G-005-030012	CERICX transfer wyciskowy, otwarty, krótki, 2-częściowy	Ø 5,5mm L 9mm	Tytan	
G-005-030011	CERICX transfer wyciskowy, otwarty, długi, 2-częściowy	Ø 5,5mm L 16mm	Tytan	

Objaśnienie: GH = Wysokość śluzówki
L = Wysokość od krawędzi implantu

ICX transfery wyciskowe zamknięte

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-005-020002	 ICX transfer wyciskowy zamknięty, niebieski, 3-częściowy zawiera: Transfer wyciskowy, śrubę łączącą, czapkę wyciskową	L 11,5mm włącznie z czapką	Tytan
C-005-040010	 ICX czapka wyciskowa, niebieska, opakowanie 10 szt		Tworzywo

ICX transfery wyciskowe otwarte

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-005-030001	 ICX transfer wyciskowy otwarty, krótki, 2-częściowy, Ø 4.5mm zawiera: transfer, śrubę łączącą, osłonkę wyciskową	L 8mm	Tytan
C-005-030002	 ICX transfer wyciskowy otwarty, długi, 2-częściowy, Ø 4.5mm zawiera: transfer, śrubę łączącą, osłonkę wyciskową	L 15,5mm	Tytan

Objaśnienie: L = Wysokość od krawędzi implantu

ICX analogi

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-006-010001		ICX analog dla implantów (BL) Bone Level Standardowy	L 15mm	Tytan
C-006-010003		ICX analog dla implantów (BL) Bone Level CAD/CAM	L 10mm	Tytan
C-006-010008		ICX analog dla implantów (TL) TISSUE LEVEL CAD/CAM	L 11,7mm	Tytan

Objaśnienie: L = Długość

UWAGA !:

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dwie różne platformy protetyczne (**BL** i **TL**) w momencie pobierania wycisków.

Przekazując wycisk do pracowni protetycznej, poinformuj technika o zamówieniu odpowiedniego analogu laboratoryjnego **BL** lub **TL**.

Jest to bardzo ważne, w przypadkach kiedy korony protetyczne będą osadzone na łącznikach o niskim profilu wytłaniania (GH 0mm).

ICX-BL
(Bone Level)
Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Artykuł: C-006-010001

ICX-TL
(Tissue Level)
Ø 3,45 · Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Artykuł: C-006-010008

Łączniki TYTANOWE ICX PROSTE


Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-007-010501	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 1 mm K 4mm	Tytan
C-007-010502	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 4mm	Tytan
C-007-010503	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 4mm	Tytan
C-007-010504	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 4 mm K 4mm	Tytan
C-007-010505	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 5 mm K 4mm	Tytan
C-007-010506	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, standard, Ø 5mm	GH 6 mm K 4mm	Tytan
C-007-016501	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, szeroki, Ø 6,5mm	GH 1 mm K 4mm	Tytan
C-007-016502	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, szeroki, Ø 6,5mm	GH 2 mm K 4mm	Tytan
C-007-016503	ICX łącznik tytanowy prosty, krótki, szeroki, Ø 6,5mm	GH 3 mm K 4mm	Tytan



Wszystkie łączniki C-007- zawierają śrubę łączącą C-007-000001



Dostępna śruba laboratoryjna C-007-000002

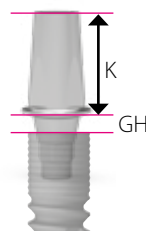

Objaśnienie:

GH = Wysokość śluzówki,
K = Wysokość komina protetycznego

Łączniki TYTANOWE ICX PROSTE

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-007-020501	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 1 mm K 7mm	Tytan
C-007-020502	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 7mm	Tytan
C-007-020503	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 7mm	Tytan
C-007-020504	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 4 mm K 7mm	Tytan
C-007-020505	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 5 mm K 7mm	Tytan
C-007-020506	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, standard, Ø 5mm	GH 6 mm K 7mm	Tytan
C-007-026501	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, szeroki, Ø 6,5mm	GH 1 mm K 7mm	Tytan
C-007-026502	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, szeroki, Ø 6,5mm	GH 2 mm K 7mm	Tytan
C-007-026503	ICX łącznik tytanowy prosty, długi, szeroki, Ø 6,5mm	GH 3 mm K 7mm	Tytan
C-007-010500	ICX łącznik tytanowy, krótki, Ø 3,7mm Tylko do implantów Bonelevel (BL) Nie stosować do implantów ICX-plus!	GH 0 mm L 5mm	Tytan
C-007-020500	ICX łącznik tytanowy, standard, Ø 3,7mm Nie stosować do implantów ICX-TL!	GH 0 mm L 7mm	Tytan
C-007-030500	ICX łącznik tytanowy, długi, Ø 3,7mm Nie stosować do implantów ICX-TL!	GH 0 mm L 9mm	Tytan



Wszystkie łączniki C-007- zawierają śrubę łączącą C-007-000001

Łączniki TYTANOWE ICX KĄTOWE I ESTETYCZNE

UWAGA: Wszystkie kątowe łączniki tytanowe są ustawione pod kątem na płaskiej powierzchni sześciokątnej gniazda.


Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-010-010010	 0°	ICX łącznik tytanowy estetyczny, prosty, 1mm	GH 1: 1,0mm	Tytan
C-010-010030		ICX łącznik tytanowy estetyczny, prosty, 3mm	GH 2: 3,0mm K 7mm	
C-010-020015	 15°	ICX łącznik tytanowy kątowy, 1,5mm	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Tytan
C-010-020025		ICX łącznik tytanowy kątowy, 2,5mm	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Tytan
C-010-020035		ICX łącznik tytanowy kątowy, 3,5mm	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Tytan
C-010-020050		ICX łącznik tytanowy kątowy, 5mm	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Tytan
C-010-040015	 25°	ICX łącznik tytanowy kątowy, 1,5mm	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Tytan
C-010-040025		ICX łącznik tytanowy kątowy, 2,5mm	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Tytan
C-010-040035		ICX łącznik tytanowy kątowy, 3,5mm	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Tytan
C-010-040050		ICX łącznik tytanowy kątowy, 5mm	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Tytan



Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

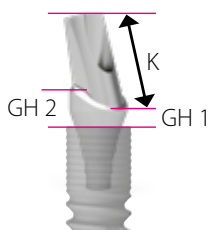

Objaśnienie:

GH = Profil wyłaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość komina protetycznego

Łączniki TYTANOWE ICX KĄTOWE I ESTETYCZNE

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-010-010005	ICX łącznik tytanowy estetyczny 0,5mm prosty, 0°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan
C-010-020005	ICX łącznik tytanowy 0,5mm kątowny 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan
C-010-040005	ICX łącznik tytanowy 0,5mm kątowny 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan



**Tylko dla implantów
ICX-BONE LEVEL**



Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-024-110005	ICX łącznik tytanowy estetyczny 0,3mm prosty, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan
C-024-120005	ICX łącznik tytanowy 0,3mm kątowny 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan
C-024-140005	ICX łącznik tytanowy 0,3mm kątowny 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Tytan



**Tylko dla implantów
ICX-TISSUE LEVEL**



Zawiera śrubę łączącą C-011-000001-01
Wkręcać ostatecznie z momentem 30 Ncm



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Łączniki ICX JEDNOCZĘŚCIOWE i łączniki ICX UNIWERSALNE

Łączniki jednoczęściowe ICX

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-021-063200		Łącznik jednoczęściowy wąski, krótki Ø 3,1mm	GH 0mm L 8mm	Tytan
C-021-063300		Łącznik jednoczęściowy wąski, długi Ø 3,1mm	GH 0mm L 11mm	Tytan
C-021-063401		Łącznik jednoczęściowy standard, Ø 4,1mm	GH 1mm K 5,5mm	Tytan
C-021-063402		Łącznik jednoczęściowy standard, Ø 4,1mm	GH 2mm K 5,5mm	Tytan
C-021-063403		Łącznik jednoczęściowy standard, Ø 4,1mm	GH 3mm K 5,5mm	Tytan
C-021-065001		Łącznik jednoczęściowy szeroki, Ø 5mm	GH 1mm K 5,5mm	Tytan
C-021-065002		Łącznik jednoczęściowy szeroki, Ø 5mm	GH 2mm K 5,5mm	Tytan
C-021-065003		Łącznik jednoczęściowy szeroki, Ø 5mm	GH 3mm K 5,5mm	Tytan
950099		Śrubokręt ICX 1,4 hex (dla 1)	L 24mm	Stal chirurgiczna
C-021-000002		Nasadkowy klucz ICX do łączników litych (dla 2)	L 25,6mm	Stal chirurgiczna

Objaśnienie: GH = Profil wylaniania mierzony od brzegu implantu
K = Wysokość części protetycznej
L = Długość całkowita

UWAGA: Dokręcać z momentem 30 Ncm. Po wykonaniu wycisku nie należy poluzowywać litego łącznika. Do przygotowania in situ.

Łączniki uniwersalne ICX (technika teleskopowa)

Do opracowania indywidualnego

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-009-100001		Łącznik uniwersalny ICX, krótki, Ø 5,2mm	L 9,5mm	Tytan
C-009-100002		Łącznik uniwersalny ICX, krótki, Ø 5,2mm	L 14,5mm	Tytan
C-009-020001		Łącznik ICX Meso Ø 7mm	L 9mm	Tytan

Objaśnienie: L = Wysokość
od krawędzi implantu



Wszystkie łączniki C-009-
zawierają śrubę łączącą C-007-000001



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Dzięki grubszym ściankom, technik może szlifować łączniki uniwersalne indywidualnie, w odpowiednim do potrzeb stopniu, jako teleskopy pierwotne.

Łączniki ICX DO BELEK, ZE ZŁOTA I DO WYPALANIA

Łączniki do systemu belkowego ICX

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-011-030001		ICX łącznik z tworzywa, do systemu belkowego, z hex	L 9mm K 6,3mm O 4,5mm	Tworzywo do wypalania
C-011-030002		ICX łącznik z tworzywa, do systemu belkowego, bez hex	L 9mm K 6,3mm O 4,5mm	Tworzywo do wypalania
C-011-020002		ICX łącznik tytanowy, do systemu belkowego, krótki, bez hex	L 9mm K 6,3mm O 4,5mm	Tytan
C-011-020003		ICX łącznik tytanowy, do systemu belkowego, długi, bez hex	L 13,5mm K 6,3mm O 4,5mm	Tytan

Łączniki ICX ze złota, CoCr i z tworzywa

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-008-010001		Łącznik ze złota, do wypalania Ø 5 mm z hex	GH 1mm	Złoto/stop HSL Ceramicor
C-008-010002		ICX łącznik ze złota, do wypalania Ø 5mm, bez hex	GH 1mm	Złoto/stop HSL Ceramicor
C-029-000022		Łącznik ICX CrCo do napalania z tuleją modelującą kanał protetyczny, z hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM (należy zwrócić uwagę na wartości WRC podczas napalania na ceramice)
C-008-020001		Łącznik ICX CrCo do napalania z tuleją modelującą kanał protetyczny, z hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm Tuleja POM 9mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM (należy zwrócić uwagę na wartości WRC podczas napalania na ceramice)
C-008-030001		Łącznik z tworzywa ICX Ø 5mm, z hex do wypalania	GH 1mm K 7mm	Tworzywo do wypalania
C-008-030002		Łącznik z tworzywa ICX Ø 5mm, bez hex do wypalania	GH 1mm K 7mm	Tworzywo do wypalania

Objaśnienie: GH = Wysokość słuszówki · K = Wysokość części preparacyjnej (komina protetycznego) · L = Wysokość od krawędzi implantu

 Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą C-011-000001

 Dostępna śruba laboratoryjna C-007-000002

Łączniki ICX-plus - TISSUE LEVEL (TL) Implant

Łącznik ICX-plus 0 mm jest kompatybilny **tylko z implantami ICX-Plus**.

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-024-010501		ICX-plus-(TL) łącznik tytanowy 0.25mm, K 5mm, krótki, 0 5mm, hex	GH 0,25mm K 5mm	Tytan
C-024-020501		ICX-plus-(TL) łącznik tytanowy 0.25mm, K 7.5mm, krótki, 0 5mm, hex	GH 0,25mm K 7,5mm	Tytan
C-024-120501		ICX-plus-(TL) łącznik tytanowy bez stopnia 0mm, K 7mm, długi, 0 5mm, hex	GH 0mm (äußerer Tulpen 0) K 7mm	Tytan
Objaśnienie: K = długość komina protetycznego  Wszystkie łączniki C-009- zawierają śrubę łączącą C-007-000001  Dostępna śruba laboratoryjna C-007-000002				
		Wewnętrzna platforma TL		
		Zewnętrzna platforma TL		

BAZY TYTANOWE I SCAN BODY DO PRAC CAD/CAM

ICX CAD/CAM bazy tytanowe i scan body

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-029-000004	 BL	ICX baza tytanowa (ti-base) Ø 4,4mm, z hex Tylko dla ICX-BONELEVEL!	GH 0mm K 4mm	Tytan
C-029-000005	 TL	ICX baza tytanowa (ti-base) Ø 4,4mm, z hex Tylko dla ICX-TISSUE LEVEL!	GH 0mm K 4mm	Tytan
C-029-000002		ICX baza tytanowa (ti-base) 0.5mm, Ø 4,4mm z hex	GH 0,5mm K 4mm	Tytan
C-029-000008		ICX baza tytanowa (ti-base) 1.5mm, Ø 4,4mm z hex	GH 1,5mm K 4mm	Tytan
C-029-000007		ICX baza tytanowa (ti-base) 2.5mm, Ø 4,4mm, z hex	GH 2,5mm K 4mm	Tytan
C-029-001001		ICX baza tytanowa (ti-base) do mostów i belek 0.5mm, Ø 4,4mm, bez hex	GH 0,5mm K 3,8mm	Tytan
C-030-000001		ICX scan body do skanowania 1. generacji	L 12mm	PEEK
C-030-000003		ICX scan body do skanowania wewnętrzznego i na modelach 2. generacji	L 12mm	Tytan/ PEEK

Aby pozyskać cyfrowe biblioteki komponentów ICX, skontaktuj się z firmą 3Z.



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
C-011-000001



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

ICX-CEREC® BAZY TYTANOWE DO SYSTEMU SIRONA®

ICX-Cerrec® bazy tytanowe (kompatybilne z systemem Sirona®)

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-029-000050		ICX-Cerrec® baza tytanowa 1mm, dla systemu Cerrec® L-Block, z hex, zawiera czapeczkę do skanowania (Bluecam)	GH 1mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Tytan
C-030-000052		ICX-Cerrec® Scanpost L do bazy C-029-000050 z hex, zawiera czapeczkę do skanowania (Bluecam)	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Tytan
C-029-000051		ICX-Cerrec® baza tytanowa 2,5mm, dla systemu Cerrec® L-Block, z hex, zawiera czapeczkę do skanowania (Bluecam)	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Tytan
C-030-000053		ICX-Cerrec® Scanpost L do bazy C-029-000051 z hex, zawiera czapeczkę do skanowania (Bluecam)	GH 4mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Tytan
6431329		Czapeczka do skanowania szara (Omnicam) Cerrec®. Ten artykuł można dodatkowo domówić na życzenie	–	PEEK

Objaśnienie: GH = Wysokość słuzówki · K = Wysokość części preparacyjnej (komina protetycznego) · L = Wysokość od krawędzi implantu



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
C-011-000001



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

UWAGA: ZALECA SIĘ WYKONYWANIE SKANÓW PRZY UŻYCIU WŁAŚCIWEGO RODZAJU ŁĄCZNIKA TYPU SCAN POST. DLA SCANPOSTU NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ BIBLIOTEKĘ.

ODPOWIEDNIA BIBLIOTEKA CAD/CAM JEST PRZECHOWYWANA W SYSTEMIE SIRONA® JAKO **BIBLIOTEKA NB A 4.5.**

Baza tytanowa ICX dedykowana tylko do systemu ZirkonZahn

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-029-000021		ICX baza tytanowa, do systemu ZirkonZahn, Ø 5,1mm, z hex	GH 1mm K 4mm	Tytan

Objaśnienie: K = Wysokość komina protetycznego



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
C-011-000001







Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Wymagana minimalna wysokość protetyczna: 5.5mm

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-020-750000	 Tylko dla implantów BONE-LEVEL! ICX-MULTI łącznik tytanowy, prosty, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Tytan
C-020-750001	 Tylko dla implantów TISSUE-LEVEL! ICX-MULTI łącznik tytanowy, prosty, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Tytan

Wymagana minimalna wysokość protetyczna: 5.5mm / używać klucza 1.2mm

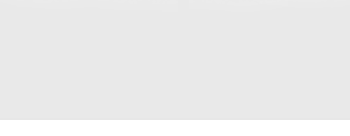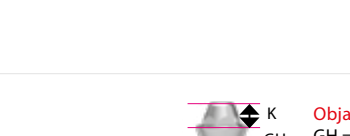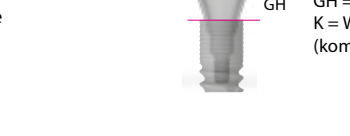Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-020-750010	ICX-MULTI łącznik prosty 1mm	GH 1mm K 2,2mm	Tytan
C-020-750020	ICX-MULTI łącznik prosty 2mm	GH 2mm K 2,2mm	Tytan
C-020-750030	ICX-MULTI łącznik prosty 3mm	GH 3mm K 2,2mm	Tytan
C-020-750040	ICX-MULTI łącznik prosty 4mm	GH 4mm K 2,2mm	Tytan
C-020-750050	ICX-MULTI łącznik prosty 5mm	GH 5mm K 2,2mm	Tytan
C-020-751705	 17° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 0.5mm	GH niska 0,5mm GH wysoka 1,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-751715	 17° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 1.5mm	GH niska 1,5mm GH wysoka 2,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-751725	 17° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 2.5mm	GH niska 2,5mm GH wysoka 3,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-751735	 17° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 3.5mm	GH niska 3,5mm GH wysoka 4,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-753505	 35° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 0.5mm	GH niska 0,5mm GH wysoka 3,25mm K 2,2mm	Tytan
C-020-753515	 35° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 1.5mm	GH niska 1,5mm GH wysoka 4,25mm K 2,2mm	Tytan
C-020-753525	 35° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 2.5mm	GH niska 2,5mm GH wysoka 5,25mm K 2,2mm	Tytan
C-020-753535	 35° ICX-MULTI łącznik kątowy z hex, 3.5mm	GH niska 3,5mm GH wysoka 6,25mm K 2,2mm	Tytan

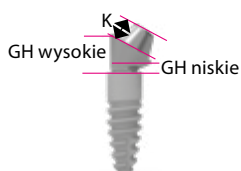

Objaśnienie:
GH = Wysokość słupówki
K = Wysokość części preparacyjnej (komina protetycznego)



Zawiera podstawową śrubę łączącą C-020-000010

ICX-MULTI® – DO PRAC PRZYKRĘCANYCH 4/6-ON-ICX

Łączniki ICX-MULTI bez hex

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-020-851705	17° ICX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 0,5mm	GH niska 0,5mm GH wysoka 1,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-851715	17° CX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 1,5mm	GH niska 1,5mm GH wysoka 2,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-851735	17° CX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 3,5mm	GH niska 3,5mm GH wysoka 4,9mm K 2,2mm	Tytan
C-020-853505	35° ICX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 0,5mm	GH niska 0,5mm GH wysoka 3,25mm K 2,2mm	Tytan
C-020-853515	35° CX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 1,5mm	GH niska 1,5mm GH wysoka 4,25mm K 2,2mm	Tytan
C-020-853535	35° CX-MULTI łącznik kątowy bez hex, 3,5mm	GH niska 3,5mm GH wysoka 6,25mm K 2,2mm	Tytan

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-020-956120	ICX-MULTI łącznik protetyczny CoCr Biodur CCM/BC NEM do napalania CrCo	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/BC
C-020-955120	ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 1 gen.	Ø 4,8mm L 12mm	Tytan
C-020-955121	ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 2 gen.	Ø 5,1mm L 10,5mm	Tytan



Zawiera śrubę łączącą protetyczną C-020-000011 (do elementów protetycznych dokręcanych do podstawy ICX-Multi)

Zakres zastosowania i wskazania

ICX-MULTI® to koncepcja protetyczna do natychmiastowej odbudowy bezzębnych szczęk, żuchwy. W celu lepszego podparcia późniejszej odbudowy możliwe jest umieszczenie implantów dystalnych pod kątem 17° lub 35°. Angulacja ta, jest następnie kompensowana przez specjalne łączniki kątowe ICX-MULTI.

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-015-100030	ICX-MULTI klucz sześciokątny SW 1,2mm średni Niezbędne!	SW 1,2mm	Stal chirurgiczna
C-020-000001	ICX-MULTI klucz nasadkowy SW 3,2mm dla łączników ICX-MULTI prostych Niezbędne!	SW 3,2mm	Stal chirurgiczna



ICX-MULTI® – DO PRAC PRZYKRĘCANYCH 4/6-ON-ICX

Wymagana minimalna wysokość protetyczna: 5.5mm

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-003-000005		ICX-MULTI Czapeczka ochronna	Ø 4,8 L 4,6mm	Tytan
C-005-070001		ICX-MULTI Transfer wyciskowy zamknięty, 3-częściowy	L 11mm	Tytan
C-005-070002		ICX-MULTI Transfer wyciskowy otwarty, 2-częściowy, krótki zawiera plastikową osłonkę	L 13mm	Tytan
C-005-070020		ICX-MULTI Transfer wyciskowy otwarty, 2-częściowy, długi zawiera plastikową osłonkę	L 16,7mm	Tytan
C-006-010007		ICX-MULTI Analog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Tytan
C-020-951120		ICX-MULTI Tuleja tytanowa	Ø 4,8 L 12mm (można skrócić do 4,1mm)	Tytan
C-020-952120		ICX-MULTI Tuleja z tworzywa do wypalania	Ø 4,8 L 12mm (można skrócić do 4,1mm)	Tworzywo do wypalania
C-020-953120		ICX-MULTI Tuleja z tworzywa PEEK (DO PRAC TYMCZASOWYCH)	Ø 4,8 L 12mm (można skrócić do 4,1mm)	Peek
C-029-002010		ICX-MULTI podstawa do cementowania ze stopniem	Ø 4,8 L 5,5mm	Tytan
C-029-002011		ICX-MULTI podstawa do cementowania 0mm	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Tytan
C-030-000010		ICX-MULTI Baza do skanowania	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek
C-031-100001		ICX-Maximus łącznik typu Locator GH 3mm, (doliczyć wysokość łącznika bazowego I CX-MULTI)	Ø 4,8 L 4,4mm	Tytan
C-030-000013		ICX-MULTI Podstawka do skanowania wąska	Ø 4,10mm L 10mm	Tytan
C-020-000120		Pin do ustawiania równoległości łączników kątowych		Tworzywo



Zawiera śrubę łączącą protetyczną C-020-000011 (do elementów protetycznych dokręcanych do podstawy ICX-Multi)

ŁĄCZNIKI HYBRYDOWE CERICX


Łączniki CERICX 0° i 15° – ze zoptymalizowanym stopniem preparacji dla systemów do skanowania wewnątrzustnego oraz systemu Cerec® - w trzech odcieniach zębów i pięciu wysokościach dziąsła.

Każdy dostępny w trzech kolorach zębów (trzonowce tylko w B)

Kolor zęba „jasny” — **A**
zbliżony do:
A1, A2, B1


Kolor zęba „standard” — **B**
zbliżony do:
A3, B2

Kolor zęba „ciemny” — **C**
zbliżony do:
A3,5/B3

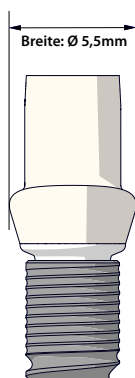

Wyjaśnienie różnych wymiarów,
na podstawie przykładowego łącznika CERICX

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-036-A/B/C 10501	CERICX łącznik prosty 1mm	Szerokość: Ø 5,5mm Głębokość: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Tytan

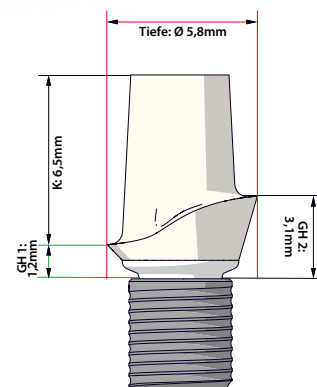

Aby określić prawidłową wysokość słuzówki (GH)
należy przestrzegać odpowiednich wymiarów!

B Odcień zęba „standard”

Nr artykułu	Opis dla CERICX-trzonowce	Wymiary	Materiał	B - „standard”
C-034-B 00525	CERICX łącznik trzonowy GH 2.5mm Kształt i profil wyłaniania jest dostosowany do kształtu zęba trzonowego.	Szerokość: Ø 9,6mm Głębokość: Ø 8,1mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 6,8mm	Cyrkon/ Tytan	
C-034-B 00535	CERICX łącznik trzonowy GH 3.5mm Kształt i profil wyłaniania jest dostosowany do kształtu zęba trzonowego.	Szerokość: Ø 9,6mm Głębokość: Ø 8,1mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 6,8mm	Cyrkon/ Tytan	

CERICX – Łączniki hybrydowe

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
C-036-A/B/C 10501	CERICX Łącznik prosty 1mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Cyrkon/ Tytan	A = Kolor zęba „jasny” 
C-036-A/B/C 10502	CERICX Łącznik prosty 2mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 5,8mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,1mm K: 6,5mm	Cyrkon/ Tytan	B = Kolor zęba „standard” 
C-036-A/B/C 10503	CERICX Łącznik prosty 3mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 5,8mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,1mm K: 6,5mm	Cyrkon/ Tytan	C = Kolor zęba „ciemny” 
C-036-A/B/C 10504	CERICX Łącznik prosty 4mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 5,8mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,1mm K: 6,5mm	Cyrkon/ Tytan	
C-036-A/B/C 10505	CERICX Łącznik prosty 5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 5,8mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,1mm K: 6,5mm	Cyrkon/ Tytan	
C-036-A/B/C 20005	CERICX Łącznik 15° kątowny 0,5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 7,2mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,2mm K: 7mm	Cyrkon/ Tytan	A = Kolor zęba „jasny” 
C-036-A/B/C 20015	CERICX Łącznik 15° kątowny 1,5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 7,2mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,2mm K: 7mm	Cyrkon/ Tytan	B = Kolor zęba „standard” 
C-036-A/B/C 20025	CERICX Łącznik 15° kątowny 2,5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 7,2mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 7mm	Cyrkon/ Tytan	C = Kolor zęba „ciemny” 
C-036-A/B/C 20035	CERICX Łącznik 15° kątowny 3,5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 7,2mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 7mm	Cyrkon/ Tytan	
C-036-A/B/C 20045	CERICX Łącznik 15° kątowny 4,5mm z hex	szer.: Ø 5,5mm gł.: Ø 7,2mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,2mm K: 7mm	Cyrkon/ Tytan	

Łączniki CERICX 0° i 15° – ze zoptymalizowanym stopniem preparacji dla systemów do skanowania wewnątrzustnego oraz systemu Cerec® - w trzech odcieniach zębów i pięciu wysokościach dziąsła.

Objaśnienie:

GH = Wysokość słuzówki

K = Wysokość komina protetycznego

L = Wysokość od krawędzi implantu




Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
C-011-000001



Dostępna śruba laboratoryjna
C-007-000002

Symbol		Opis	Wymiary	Materiał
C-022-060001		ICX-t-bona łącznik kulowy, 1mm, średnica kuli: Ø 2.25mm	GH 1mm	Tytan
C-022-060002		ICX-t-bona łącznik kulowy, 2mm, średnica kuli: Ø 2.25mm	GH 2mm	Tytan
C-022-060003		ICX-t-bona łącznik kulowy, 3mm, średnica kuli: Ø 2.25mm	GH 3mm	Tytan
C-022-060004		ICX-t-bona łącznik kulowy, 4mm, średnica kuli: Ø 2.25mm	GH 4mm	Tytan
C-015-100007		ICX-t-bona przenośnik do łączników kulowych	L 19mm	Stal chirurgiczna


Objaśnienie: GH = Wysokość śluzówki

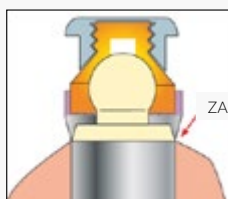

ZABLOKOWANE

1. Montaż matrycy T-Ecco na modelu


Matryca osadzona na modelu/modelu implantu. Przy większej ilości implantów matryce muszą być koniecznie osadzone równolegle oraz osiowo w tym samym kierunku względem siebie! Podcięcia wolne przestrzenie pod matrycą na modelu blokujemy silikonem lub woskiem jak na zdjęciu. Wypełniacz nie może przepłynąć pod matrycę ani w gniazdo matrycy. Jako osłonę szczelin w matrycy wykonanej ze szlachetnego metalu zastosowano dostarczony z matrycą pierścień z tworzywa sztucznego. Następnie umieszczamy protezę na matrycach i scalamy polimerem.

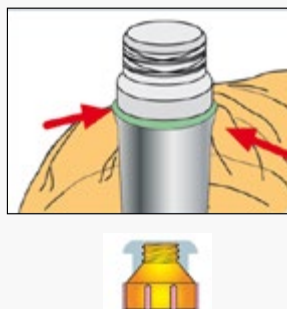

2. Montaż matrycy T-Ecco w ustach


W protezie muszą zostać wywiercone wystarczająco duże otwory. Odpowiednio spreparowany kawałek koferdamu lub lateksowej rękawiczki należy umieścić pomiędzy bazą łącznika a matrycą zgodnie z rysunkiem. Przy większej ilości implantów matryce muszą być koniecznie osadzone równolegle oraz osiowo w tym samym kierunku względem siebie! Niewielką ilość utwardzalnego na zimno polimeru umieść w otworach protezy i następnie umieść protezę in situ. Tworzywo sztuczne nie może przepłynąć pod matrycę lub w gniazdo matrycy. Jako osłonę szczelin w matrycy wykonanej ze szlachetnego metalu zastosowano dostarczony z matrycą pierścień z tworzywa sztucznego. Po utwardzeniu polimeru zdjęj protezę. Ewentualne braki w protezie uzupełnij tworzywem sztucznym lub usunąć nadmiar polimeru jeżeli jest to konieczne.

Aktywacja matrycy T-Ecco wewnętrznej

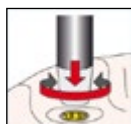

Protezę należy umieścić na bezpiecznym podłożu. Aktywator umieścić w osiowym położeniu zgodnie z rysunkiem i lekkim wciśnięciem jednocześnie obracając skrócić łopatki matrycy do środka. Z pomocą modelu implantu oraz łącznika kulowego można skontrolować ustawienie siły zacisku.

Dezaktywacja matrycy T-Ecco wewnętrznej

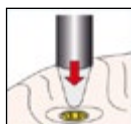

Protezę należy umieścić na bezpiecznym podłożu. Aktywator umieścić w osiowym położeniu zgodnie z rysunkiem i lekkim wciśnięciem rozsunąć łopatki matrycy.

UWAGA: Dezaktywacja matrycy przebiega znacznie łatwiej! Z pomocą modelu implantu oraz łącznika kulowego można skontrolować ustawienie siły zacisku.

Wymiana matrycy wewnętrznej:



Ważna informacja!

Przed użyciem zatrasku kulowego t-ecco należy dokręcić wewnętrzną matrycę!

Ta sama średnica kulki dla wszystkich implantów ICX.

t-ecco/matryce

Nr artykułu	Artykuł	Materiał
T-13825	 t-ecco, matryca, kompletna, w tym złota wkładka wewnętrzna, czerwony plastikowy pierścień ochronny	Tytan plus AuPt
T-13836	 t-ecco, matryca zewnętrzna, bez wewnętrznej matrycy	Tytan
T-13833	 t-ecco, wewnętrzna matryca złota, z regulacją	AuPt
T-13846	 t-ecco, wewnętrzna matryca żółta, słaba	Tytan Klasa 5
T-13845	 t-ecco, wewnętrzna matryca czerwona, mocna	Tytan Klasa 5
EK-833100	 Analog	Mosiądz
T-10571	 Aktywacja Deaktywacja t-ecco aktywator / deaktywator	Stal chirurgiczna
960002	 Klucz sześciokątny 0.9mm, L 20mm	Stal chirurgiczna
C-015-100029	 Klucz sześciokątny 0.9mm, długi, jednoczęściowy L 35mm	Stal chirurgiczna

Dalbo®-PLUS/matryce


Nr artykułu	Artykuł	Materiał
DP-055890	 Matryca Dalbo PLUS TE, kompletna, w tym Wkład lamelowy Dalbo PLUS	Tytan plus Elitor
DP-055643	 Wkład lamelowy Dalbo PLUS (bez wcięcia)	Elitor
DP-050068	 Miękka wkładka lameli Dalbo PLUS Tuning (1 wcięcie) do wytartej główki kulki do 0,05 mm	Elitor
DP-055687	 Dalbo PLUS Wkładka do listwy tuningowej (2 wcięcia) do wytartej główki kulki od 0,05 mm	Elitor
DP-072609	 Narzędzie/aktywator Dalbo PLUS (co ¼ obrotu wzrasta siła retencji o 200g)	Stal chirurgiczna

Uwaga: Upewnij się, że używasz narzędzia Dalbo-PLUS (DP-072609) w celu indywidualnego dostosowania retencji w zależności od sytuacji.

ŁĄCZNIKI ICX-MAXIMUS, KLASYCZNE, JEDNOCZĘŚCIOWE

Uwaga:

Gdy wysokość śluzówki wynosi np. 1 mm, na łączniku pozostaje dodatkowa odległość 0.5 mm między brzegiem śluzówki a dolną krawędzią matrycy.

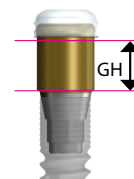

Łączniki ICX-Maximus klasyczne, jednoczęściowe

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-031-020001	ICX-Maximus łącznik, prosty 1mm, jednoczęściowy	GH 1mm	Tytan
C-031-020002	ICX-Maximus łącznik, prosty 2mm, jednoczęściowy	GH 2mm	Tytan
C-031-020003	ICX-Maximus łącznik, prosty 3mm, jednoczęściowy	GH 3mm	Tytan
C-031-020004	ICX-Maximus łącznik, prosty 4mm, jednoczęściowy	GH 4mm	Tytan



Łączniki jedno- i dwuczęściowe ICX-MAXIMUS są zastrzeżonym produktem marki Medentis Medical, są kompatybilne z łącznikami Locator™. Łączniki są dostępne dla wszystkich implantów ICX!

Objaśnienie: GH = Wysokość śluzówki

C-015-100018		Klucz trójkątny, do systemu ICX-Maximus 25mm, krótki	Stal chirurgiczna
C-015-100031		Klucz trójkątny, do systemu ICX-Maximus 30mm, długi	Stal chirurgiczna

ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ŁĄCZNIKI ICX-MAXIMUS, DWUCZĘŚCIOWE

Łączniki ICX-Maximus dwuczęściowe

Patryce ze śrubą łączącą. Nadbudowy wyposażone są w hex, przykręcane do implantu.

Symbol	Opis	Wymiary	Materiał
C-031-010001	Łącznik ICX-Maximus, 1mm, z hex, dwuczęściowy, zawiera śrubę łączącą	GH 1mm	Tytan
C-031-010002	Łącznik ICX-Maximus, 2mm, z hex, dwuczęściowy, zawiera śrubę łączącą	GH 2mm	Tytan
C-031-010003	Łącznik ICX-Maximus, 3mm, z hex, dwuczęściowy, zawiera śrubę łączącą	GH 3mm	Tytan
C-031-010004	Łącznik ICX-Maximus, 4mm, z hex, dwuczęściowy, zawiera śrubę łączącą	GH 4mm	Tytan
C-031-010005	Łącznik ICX-Maximus, 5mm, z hex, dwuczęściowy, zawiera śrubę łączącą	GH 5mm	Tytan

Łączniki jedno- i dwuczęściowe ICX-Maximus są zastrzeżonym produktem marki Medentis Medical, są kompatybilne z łącznikami Locator™. Łączniki są dostępne dla wszystkich implantów ICX!

Uwaga: łącznik jest montowany za pomocą sześciokątnego klucza protetycznego 1.4mm


 Wszystkie łączniki zawierają śrubę C-031-000001

C-031-000001		ICX-Maximus Śruba łącząca	Tytan klasa 5
C-015-100025		ICX klucz protetyczny SW 1,4mm	Stal chirurgiczna

SYSTEM ICX-MAXIMUS / LOCATOR AKCESORIA

Matryce ICX-Maximus/Lokator – Akcesoria:

Nr artykułu	Artykuł	Materiał
C-031-852400	 Bezbarwna wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 2.3 kg, silna, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852700	 Różowa wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 1.6 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852900	 Niebieska wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 0.7 kg, słaba, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-854700	 Zielona wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 1.8 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 20^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-854800	 Czerwona wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 0.4 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 20^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-851500	 Czarna wkładka retencyjna, brak retencji (laboratoryjna)	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852300	 ICX-Maximus blokujący element dystansowy	Tworzywo (pakiet 2 szt.)
C-031-851902	 Matryca do protezy - zestaw (tytanowa czapka z czarnym wkładem laboratoryjnym, pierścien dystansowy i wkładki retencyjne)	Tytan/ Tworzywo (pakiet 2 szt.)
C-031-851910	 Matryca do protezy - zestaw (tytanowa czapka z czarnym wkładem laboratoryjnym, pierścien dystansowy i wkładki retencyjne)	Tytan/ Tworzywo (pakiet 10 szt.)
C-015-100032	 Narzędzie wielofunkcyjne do systemu ICX-MAXIMUS	Stal chirurgiczna
C-031-850501	 Transfer wyciskowy	Tytan (pakiet 4 szt.)
C-031-853000	 Analog ICX-MAXIMUS 04mm	Tytan (pakiet 4 szt.)
C-015-100018	 Trójkąny klucz do łączników ICX-MAXIMUS, krótki, 25mm	Stal chirurgiczna
C-015-100031	 Trójkąny klucz do łączników ICX-MAXIMUS, długi, 30mm	Stal chirurgiczna

Łączniki jedno- i dwuczęściowe ICX Maximus są własnością firmy Medentis Medical i są kompatybilne z łącznikami Locator™. **Dostępne są dla wszystkich implantów ICX.**

Produkty oznaczone ® i ™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiedniego producenta.

medentis
medical

CM LOC® system matryc

Nr artykułu	Opis
0500300	 CM LOC® Bazowy zestaw dwupak. zawiera: 2 x CM LOC® obudowa dla wkładek Pekkton® 2 x CM LOC® wkładka retencyjna b.słaba 2 x CM LOC® wkładka retencyjna słaba 2 x CM LOC® wkładka retencyjna średnia 2 x CM LOC® wkładka retencyjna mocna 2 x CM LOC® wkładka techniczna 2 x CM LOC® podkładka
07000205	 CM LOC® Multi-Tool (bezwzględnie wymagane)

	b.słaba	słaba	średnia	silna
SIŁY RETENCYJNE WKŁADEK PEKKTON®				
	~400gr	~1200gr	~1800gr	~2400gr

Uzupełnienia protetyczne wymagają maksymalnej elastyczności planowania, trwałości, komfortu i kompatybilności systemowej.


System matryc CM LOC® to modułowy system matryc do uniwersalnych zastosowań. Zwiększający komfort pracy lekarza i komfort pacjenta.

ZALETY SYSTEMU:

- Prosta aplikacja przyjazna lekarzowi i pacjentowi.
- Łatwa wymiana wkładek retencyjnych Pekkton®.
- Wysoka odporność na wchłanianie płynów, resztek pokarmowych oraz zapachów.
- Zoptymalizowana konstrukcja matrycy z wkładkami retencyjnymi Pekkton®, zapewniającymi wysoką odporność na zużycie.

Konstrukcja matrycy z wkładkami retencyjnymi wykonanymi z wysokowydajnego polimeru Pekkton®, zapewnia dobrą odporność na ścieranie oraz umożliwia odbudowę za pomocą łączników ICX-MAXIMUS. Matryce CM LOC® są dostępne z czterema wymiennymi wkładkami retencyjnymi o czterech zdefiniowanych poziomach siły. Matryca w kolorze dęszla zapewnia estetyczne rozwiązanie.

System matryc CM LOC® jest kompatybilny z łącznikami ICX-Maximus i LOCATOR®!

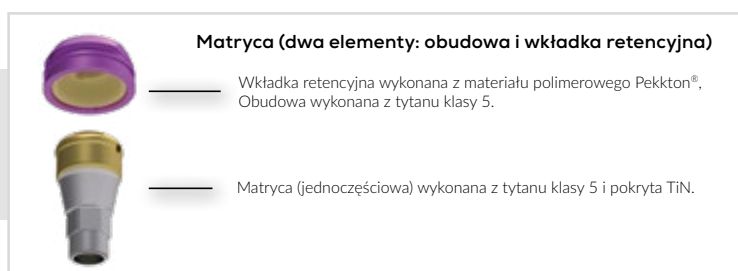

Symbol	Opis	Materiał
C-018-000101	ICX kasetka protetyczna, pusta (bez zawartości)	Tworzywo, sterylizowalny
C-018-000102	ICX kasetka protetyczna, pełna (kompletnie wyposażona)	Tworzywo, sterylizowalny



Symbol	Opis	Materiał
960001	 ICX rączka z kluczem dynamometrycznym do regulacji w zakresie 10-45 Ncm	Stal chirurgiczna
960007	 ICX adapter uniwersalny do wszystkich narzędzi wyposażonych w końcówkę maszynową na kątnicę	Stal chirurgiczna
960002	 ICX klucz protetyczny sześciokątny 0.9mm, L 20mm do matryc wewnętrznych t-ecco oraz do śrub zamykających ICX-mini	Stal chirurgiczna
C-015-100030	 ICX klucz protetyczny, jednoczęściowy, sześciokątny 1.2mm, średni, L 27mm	Stal chirurgiczna
950098	 ICX klucz protetyczny na kątnicę lub adapter, sześciokątny 1.4mm, długi, L 28mm do śrub zamykających, łączników oraz do śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100025	 ICX klucz protetyczny na kątnicę lub adapter, sześciokątny 1.4mm, średni, L 24mm do śrub zamykających, łączników oraz do śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100007	 ICX przenośnik do łączników kulowych t-bona, L 19mm	Stal chirurgiczna
C-020-000001	 ICX przenośnik do łączników ICX-MULTI prostych, sześciokątny 3.2mm	Stal chirurgiczna
960004	 ICX przedłużka do wiertła i kluczy, L 28mm, używać maksymalnie do momentu obrotowego 35Ncm!	Stal chirurgiczna
C-015-100005	 ICX narzędzie do demontażu łączników protetycznych, L 33mm	Stal chirurgiczna

ICX

Das FAIRE Premium-Implantat-System



Medical Smart
Solutions



ICX – przenośniki do implantów i łączników

Symbol		Opis	Materiał
C-015-100006		ICX przenośnik do implantów ICX-MINI Dla wszystkich implantów ICX-MINI Ø 2.9mm	Stal chirurgiczna
C-021-000002		ICX przenośnik do implantów cyrkonowych ICX-WHITE oraz łączników jednoczęściowych	Stal chirurgiczna
C-015-100001		ICX przenośnik do implantów z końcówką maszynową na kątnice, L 23mm, krótki, Pasuje do implantów: Ø 3.45/3.75/4.1/4.8	Stal chirurgiczna
C-015-100002		ICX przenośnik do implantów z końcówką maszynową na kątnice, L 29mm, średni, Pasuje do implantów: Ø 3.45/3.75/4.1/4.8	Stal chirurgiczna
C-015-100004		ICX przenośnik do implantów z końcówką maszynową na kątnice, L 40mm, długi, Pasuje do implantów: Ø 3.45/3.75/4.1/4.8	Stal chirurgiczna
C-015-100021		ICX przenośnik do implantów jednoczęściowy L 30mm, średni, Pasuje do implantów: Ø 3.45/3.75/4.1/4.8	Stal chirurgiczna
C-015-100040		ICX przenośnik do implantów z końcówką maszynową na kątnice L 30mm z elementem zapadkowym. Innowacyjny system zatrzaskowy umożliwia łatwe wyjmowanie implantów ICX.	Stal chirurgiczna
C-015-100035		ICX przenośnik do implantów jednoczęściowy, L 31mm z elementem zapadkowym. Innowacyjny system zatrzaskowy umożliwia łatwe wyjmowanie implantów ICX.	Stal chirurgiczna

ICX - klucze protetyczne

Symbol		Opis	Materiał
950099		ICX klucz protetyczny z końcówką maszynową na kątnice 1.4mm, średni, L 24mm do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
950098		ICX klucz protetyczny z końcówką maszynową na kątnice 1.4mm, długi, L 28mm do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
950097		ICX klucz protetyczny z końcówką maszynową na kątnice 1.4mm, bardzo długi, L 45mm do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100023		ICX klucz protetyczny jednoczęściowy hex 1.4mm, krótki, L 21mm, do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100025		ICX klucz protetyczny jednoczęściowy hex 1.4mm, średni, L 27mm, do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100024		ICX klucz protetyczny jednoczęściowy hex 1.4mm, długi, L 31mm, do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących	Stal chirurgiczna
C-015-100033		ICX klucz protetyczny z końcówką maszynową na kątnice 1.2mm, L 25mm do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących ICX-NARROW oraz do MULTI-UNIT	Stal chirurgiczna
C-015-100030		ICX klucz protetyczny jednoczęściowy hex 1.2mm, średni, L 27mm, do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących ICX-NARROW oraz do łączników MULTI-UNIT	Stal chirurgiczna
C-015-100036		ICX klucz protetyczny jednoczęściowy hex 1.2mm, długi, L 32mm, do śrub łączników, śrub zamykających i śrub gojących ICX-NARROW oraz do łączników MULTI-UNIT	Stal chirurgiczna
960002		ICX klucz protetyczny z końcówką maszynową na kątnice 0.9mm, L 20mm, do matryc wewnętrznych t-ecoo oraz do śrub zamykających ICX-MINI	Stal chirurgiczna

ICX - pozostałe akcesoria

Symbol		Opis	Materiał
C-015-100009		Klucz kontrowy do implantów ICX-MINI	Stal chirurgiczna
C-014-230315		ICX pin do sprawdzania równoległości łoża pod implanty Ø 2.3/Ø 3.15	Tytan
C-014-350410		ICX pin do sprawdzania równoległości łoża pod implanty Ø 3.5/Ø 4.1	Tytan
C-014-006002		ICX profiler do kości z końcówką maszynową na kątnicę Ø 3.45 - Ø 4.8 do odkrywania przerośniętych tkanek kostną implantów	Stal chirurgiczna
C-015-100020		Śrubokręt chirurgiczny ICX do narzędzi i przenośników z końcówką maszynową	Stal chirurgiczna

Śruby łączące ICX

Symbol		Opis	Materiał
N-020-000010		ICX-3.3 śruba łącząca	Tytan

Symbol		Opis	Materiał
N-011-000001		ICX-3.3 śruba łącząca	Tytan

Symbol		Opis	Materiał
N-007-000002		ICX-3.3 śruba łącząca laboratoryjna zielona	Tytan

Symbol		Opis	Materiał
C-007-000001		Śruba łącząca ICX srebrna Pasuje do łączników ICX C-007, C-024 jak również do transferów wyciskowych do łyżki zamkniętej ICX.	Tytan

Symbol		Opis	Materiał
C-011-000001		Śruba łącząca ICX fioletowa Pasuje do łączników ICX C-007, C-024 oraz ICX-multi	Tytan

Dla lepszej identyfikacji, dostarczana śruba jest anodowana na kolor fioletowy.

Śruby łączące ICX

Symbol	Opis	Materiał
C-007-000002	 ICX śruba laboratoryjna niebieska Pasuje do wszystkich łączników jako śruba techniczna. Z wyłączeniem systemu ICX-multi oraz ICX-MAXIMUS NIE NADAJE SIĘ DO OSTATECZNEGO MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW U PACJENTA!	Tytan

Symbol	Opis	Materiał
C-020-000010	 ICX-MULTI śruby podstawowe (śruba łącząca do łączników kątowych ICX-multi do implantu)	Tytan

Symbol	Opis	Materiał
C-020-000011	 ICX-MULTI śruby protetyczne łączące	Tytan

Symbol	Opis	Materiał
C-031-000001	 ICX-Maximus śruby łączące	Tytan



5 Ncm do 10 Ncm (dokręcać ręcznie)

Śruby
zamykające




Śruby
gojące



Transfery
wyciskowe



Łączniki
z tworzywa

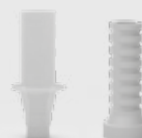



maksymalnie 15 Ncm

Scanbody
oraz
wszystkie pozostałe
łączniki
wykonane z PEEK





maksymalnie 30 Ncm

Wszystkie
tytanowe
łączniki



Bazy
tytanowe



CERICX



Łączniki
kulowe



ICX-Maximus



Łączniki
ICX-multi



(śruby protetyczne
ICX-MULTI **27 Ncm**)



Implanty ICX

Implanty osadzać z wartościami momentu obrotowego:

nie mniejszymi niż
15Ncm
i nie większymi niż
55Ncm.



Natychmiastowe obciążenie:

nie mniej niż
35Ncm



Implanty ICX-ACTIVE MASTER

W obszarze
międzykorzeniowym
nie więcej niż
40Ncm



PREMILLE ICX ORAZ RAMKA DO FREZOWANIA



PREMILLE ICX pasują do następujących systemów:



ICX-System®

(Oznaczenie MED)



Medentika®

(Oznaczenie MDK)



Amann Girrbach®

(Oznaczenie AGH)



Nasza seria łączników ICX-Premill jest stale uzupełniana o kolejne systemy



Biały ○ = Ø 2,9mm · Różowy ● = Ø 3,3mm ·

Żółty ● = Ø 3,45mm · Czerwony ● = Ø 3,75mm · Zielony ● = Ø 4,1mm · Niebieski ● = Ø 4,8mm

Proszę zwrócić uwagę na informację w nazwie produktu: „BL” kompatybilny tylko z implantami BoneLevel; „TL” kompatybilny tylko z implantami TissueLevel

Wskazania

Rodzaj pracy	Materiał	Odbudowa 1 zęba region przedni	Odbudowa 1 zęba odcinki boczne	Odbudowa wielu zębów region przedni	Odbudowa wielu zębów odcinki boczne	Odbudowy całkowite pełnego łuku
cementowana						
Prosty*	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Kątowy*	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Jednoczęściowy	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Uniwersalny	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
przykręcana						
most	Tytan (do nadlewania)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	HSL/Ceramicor (do nadlewania)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	POM (do wypalania)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
złoto/ tworzywo	HSL/Ceramicor (do nadlewania)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
tworzywo	POM (do wypalania)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
CoCr	CoCr	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
MULTI	Tytan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
MULTI łączniki protetyczne	Tytan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CoCr (do nadlewania)			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	PEEK			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	POM (do wypalania)			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	Tytan (do spawania)			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CoCr Schweißaufbau			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Prace zdejmowane						
t-bona	Tytan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ● ●
ICX-MAXIMUS	Tytan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ● ● ● ● ●
Teleskop	Tytan			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	HSL/Ceramicor			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CoCr			● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
CAD/CAM						
Bazy tytanowe	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CoCr	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Premille	Tytan	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CoCr	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
CERICX	Tytan/cyrkon	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

TECHNIKA SPAWANIA WEWNĄTRZUSTNEGO

Spawanie (zgrzewanie) wewnątrzustne pozwala na bezpieczne obciążenie natychmiastowe prac pełnołukowych. Dzięki połączeniu specjalnych łączników przykręconych do multiunitów za pomocą drutu tytanowego możliwe jest rozłożenie sił żucia na wszystkie implanty i zabezpieczenie ich przed przeciążeniem.

Zalety techniki:

- Bezpieczeństwo i przewidywalność przy natychmiastowym obciążeniu.
- Natychmiastowe i trwałe uzupełnienia dla pacjentów.
- Zabieg chirurgiczny i dostarczenie protezy w tym samym dniu.
- Szttywne szynowanie implantów minimalizuje ryzyko przeciążenia implantów podczas fazy gojenia.
- Standaryzowany protokół ze specjalnie zaprojektowanymi komponentami.
- Brak ryzyka zniekształcania podczas pobierania wycisków.
- Natychmiastowe wzmocnienie uzupełnienia tymczasowego podbudową tytanową.
- Łatwość i wygoda w obsłudze urządzenia do spawania.

Spawarka wewnątrzustna



System ICX proponuje łączniki do konstrukcji spawanych:

Nr artykułu	Opis	Wymiary	Materiał
C-020-955120	ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 1 gen.	Ø 4,8mm L 12mm	Tytan
C-020-955121	ICX-multi łącznik do konstrukcji spawanych za pomocą tytanowego drutu 2 gen.	Ø 5,1mm L 10,5mm	Tytan

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach z techniki spawania wewnątrzustnego.
Informacje: akademia.3z.pl / tel. +48 605 461 012

ICX-MAGELLAN X

Cyfrowe planowanie zabiegów implantologicznych w 3D
Wykorzystaj możliwości planowania wstecznego.



KASETA CHIRURGICZNA ICX-MAGELLAN SURGERY BOX 3.0

Kaseta ICX-Magellan to specjalnie zaprojektowany kompleksowy zestaw wiertel i narzędzi chirurgicznych z wbudowanym systemem bezpieczeństwa, który pozwala na precyzyjne i pewne przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego.

Indeks:
C-018-100004



Zalety nowej kasety do nawigacji:

- pełna nawigacja wszystkich długości i średnic implantów ICX, w tym ICX 3.3mm (Premium/Active),
- dodano śrubokręty protetyczne oraz klucz dynamometryczny,
- wydajniejsze chłodzenie,
- ergonomiczny design, wyraźne oznaczenie kolorami wiertel i przenośników,
- dodano stalową miseczkę z możliwością wysunięcia.

Nr artykułu	Wiertła ICX-3.3 różowe ●	Opis
C-032-133008		D1 wiertło różowe 8mm ● ● ●
C-032-133010		D1 wiertło różowe 10mm ● ● ●
C-032-133012		D1 wiertło różowe 12,5mm ● ● ●
C-032-033008		D2-3 wiertło różowe 8mm ● ●
C-032-033010		D2-3 wiertło różowe 10mm ● ●
C-032-033012		D2-3 wiertło różowe 12,5mm ● ●
C-032-333008		D4 wiertło różowe 8mm ●
C-032-333010		D4 wiertło różowe 10mm ●
C-032-333012		D4 wiertło różowe 12,5mm ●
C-032-233000		wiertło różowe stopujące ●
C-032-033000		sztanca różowa ●

Nr artykułu	Wiertła ICX-3.45 żółte ●	Opis
C-032-134506		D1 wiertło żółte 6,5mm ● ● ●
C-032-134508		D1 wiertło żółte 8mm ● ● ●
C-032-134510		D1 wiertło żółte 10mm ● ● ●
C-032-134512		D1 wiertło żółte 12,5mm ● ● ●
C-032-034506		D2-3 wiertło żółte 6,5mm ● ●
C-032-034508		D2-3 wiertło żółte 8mm ● ●
C-032-034510		D2-3 wiertło żółte 10mm ● ●
C-032-034512		D2-3 wiertło żółte 12,5mm ● ●
C-032-334506		D4 wiertło żółte 6,5mm ●
C-032-334508		D4 wiertło żółte 8mm ●
C-032-334510		D4 wiertło żółte 10mm ●
C-032-334512		D4 wiertło żółte 12,5mm ●
C-032-234500		wiertło żółte stopujące (Stop-Drill) ●
C-032-034500		sztanca żółta ●

Nr artykułu	Wiertła ICX-3.75 czerwone ●	Opis
C-032-137508		D1 wiertło czerwone 8mm ● ● ●
C-032-137510		D1 wiertło czerwone 10mm ● ● ●
C-032-137512		D1 wiertło czerwone 12,5mm ● ● ●
C-032-137515		D1 wiertło czerwone 15mm ● ● ●
C-032-037508		D2-3 wiertło czerwone 8mm ● ●
C-032-037510		D2-3 wiertło czerwone 10mm ● ●
C-032-037512		D2-3 wiertło czerwone 12,5mm ● ●
C-032-037515		D2-3 wiertło czerwone 15mm ● ●
C-032-337508		D4 wiertło czerwone 8mm ●
C-032-337510		D4 wiertło czerwone 10mm ●
C-032-337512		D4 wiertło czerwone 12,5mm ●
C-032-337515		D4 wiertło czerwone 15mm ●
C-032-237500		wiertło czerwone stopujące ●
C-032-037500		sztanca czerwona ●

Nr artykułu	Wiertła ICX-4.1 zielone ●	Opis
C-032-141008		D1 wiertło zielone 8mm ● ● ●
C-032-141010		D1 wiertło zielone 10mm ● ● ●
C-032-141012		D1 wiertło zielone 12,5mm ● ● ●
C-032-141015		D1 wiertło zielone 15mm ● ● ●
C-032-041008		D2-3 wiertło zielone 8mm ● ●
C-032-041010		D2-3 wiertło zielone 10mm ● ●
C-032-041012		D2-3 wiertło zielone 12,5mm ● ●
C-032-041015		D2-3 wiertło zielone 15mm ● ●
C-032-341008		D4 wiertło zielone 8mm ●
C-032-341010		D4 wiertło zielone 10mm ●
C-032-341012		D4 wiertło zielone 12,5mm ●
C-032-341015		D4 wiertło zielone 15mm ●

C-032-241000		wiertło zielone stopujące	●
C-032-041000		sztanca zielona	●

Nr artykułu	Wiertła ICX-4.8 niebieskie ●	Opis	
C-032-148008		D1 wiertło niebieskie 8mm	● ● ●
C-032-148010		D1 wiertło niebieskie 10mm	● ● ●
C-032-148012		D1 wiertło niebieskie 12,5mm	● ● ●
C-032-148015		D1 wiertło niebieskie 15mm	● ● ●
C-032-048008		D2-3 wiertło niebieskie 8mm	● ●
C-032-048010		D2-3 wiertło niebieskie 10mm	● ●
C-032-048012		D2-3 wiertło niebieskie 12,5mm	● ●
C-032-048015		D2-3 wiertło niebieskie 15mm	● ●
C-032-348008		D4 wiertło niebieskie 8mm	●
C-032-348010		D4 wiertło niebieskie 10mm	●
C-032-348012		D4 wiertło niebieskie 12,5mm	●
C-032-348015		D4 wiertło niebieskie 15mm	●
C-032-248000		wiertło niebieskie stopujące	●
C-032-048000		sztanca niebieska	●




PROTOKÓŁ WIERCENIA ORAZ PRZYKŁAD UŻYCIA:


Protokół wiercenia - ICX-MAGELLAN z implantem Ø 3.75 x 12.5mm

Implant Ø 3,75 x 12,5mm



Wyjaśnienia przykładu użycia – sposób postępowania można zastosować dla wszystkich średnic implantów oraz gęstości kości

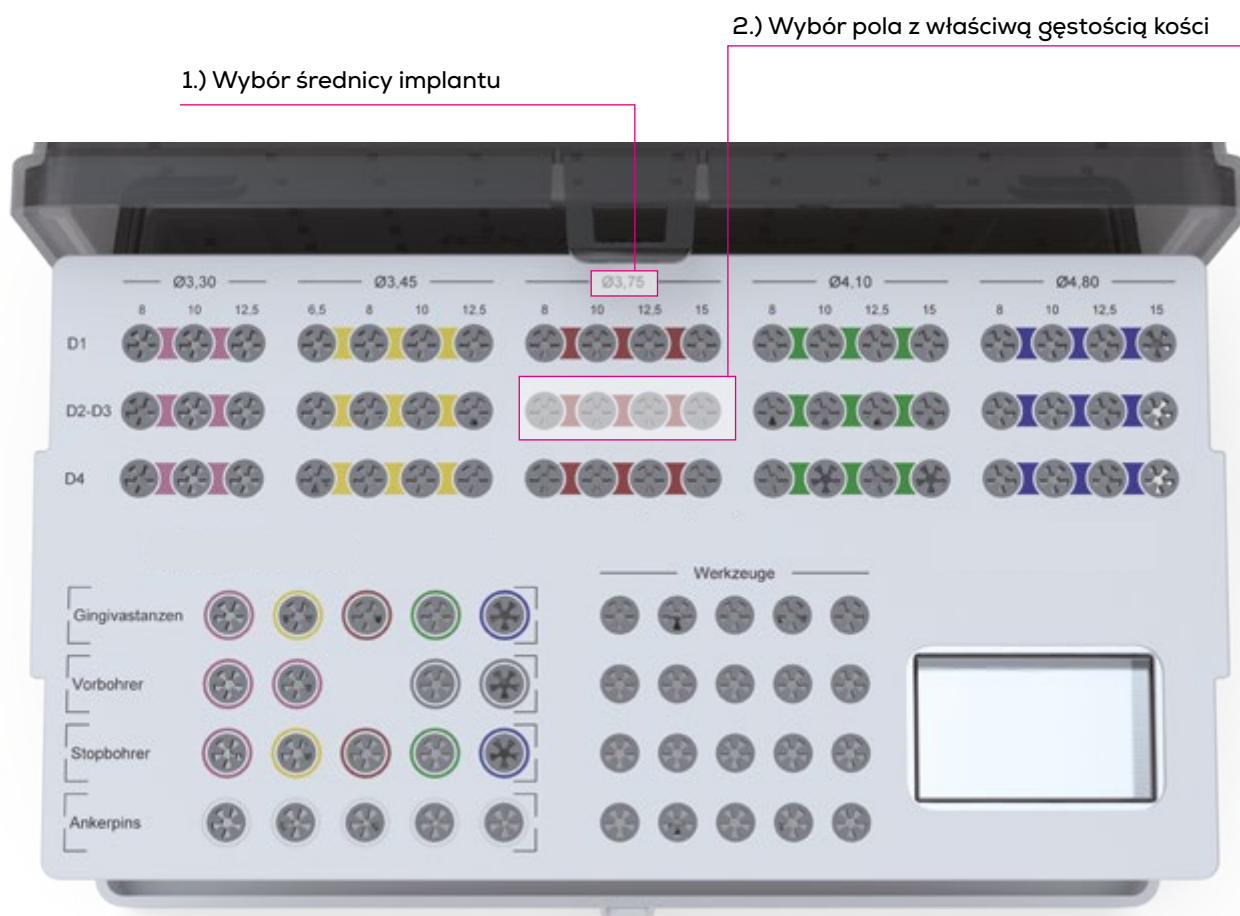

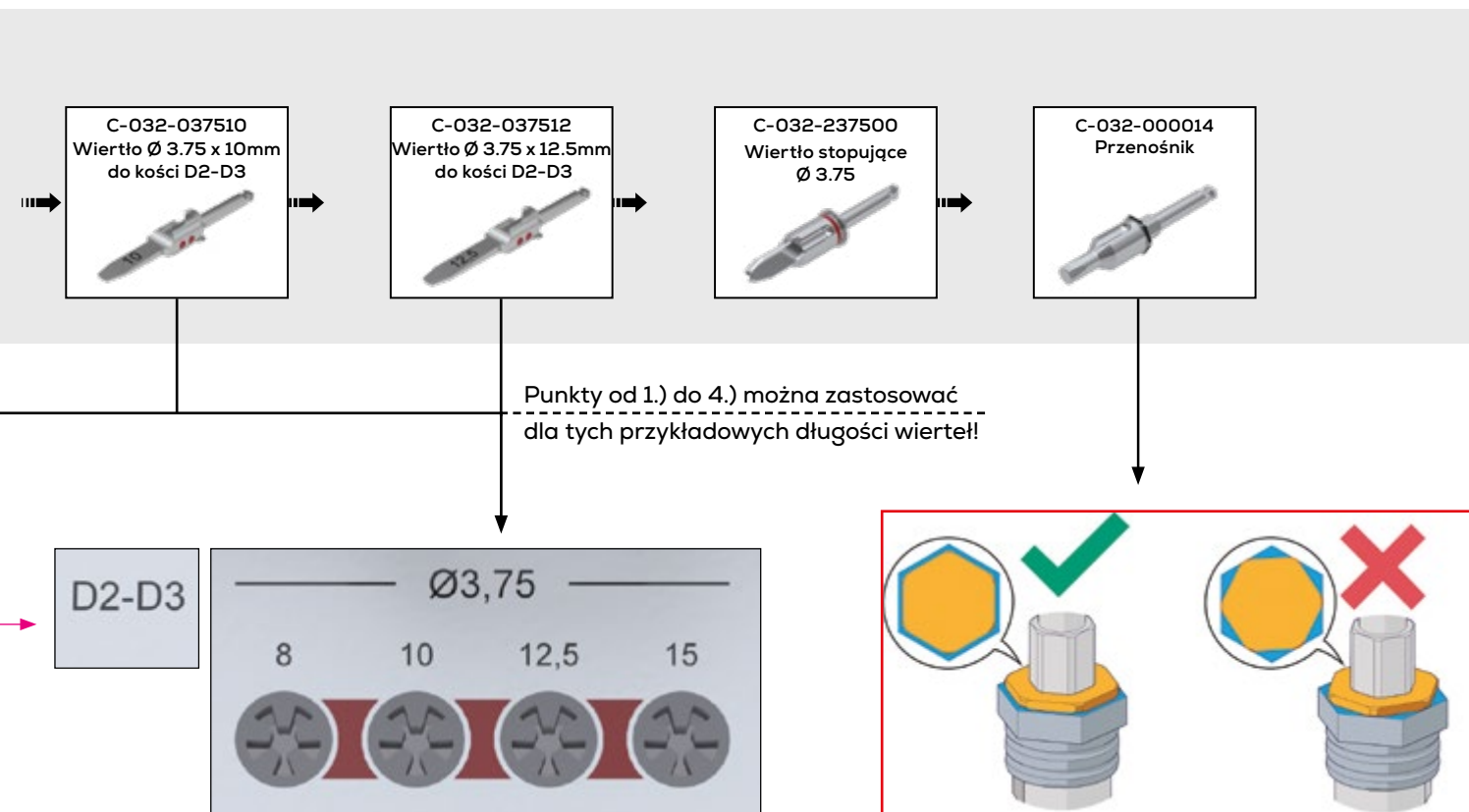

3) Rozpoczęcie wiercenia od najkrótszego wiertła. (8mm)

4) Kontynuacja każdym następnym wiertłem do osiągnięcia żądanej długości implantu (na przykładzie: 12,5 mm)

UWAGA: Wiertło stopujące jest absolutnie obowiązkowe i konieczne w ostatniej sekwencji wiercenia!

5) Wprowadzenie implantu: W przypadku implantów ICX wybierz narzędzie o indeksie: C-032-000014
W przypadku implantów ICX-Plus wybierz narzędzie o indeksie: C-032-000015
(Przenośnik implantu kompatybilny z ICX-Plus można rozpoznać po żółtym indeksie!)

Obroty wiertła:
wszystkie wiertła poza * NIEBIESKIMI 500 Obr./min. * NIEBIESKIE: 400 Obr./min.
* Sztanca: 15 Obr./min.

Ważna informacja:

W przypadku kątowych lub indywidualnych łączników zawsze ustawić przenośnik implantu równolegle do krawędzi tulei!

Nr artykułu		Artykuł
C-032-000008 SLV-01		Tulejka stopująca do wiertel Magellan, hex Ø wewn. 4,85 mm · Ø zewn. 5,6 mm · Ø kołnierza 6,0 mm
C-032-000001 SLV-02		Tulejka stopująca do wiertel Magellan, okrągła Ø wewn. 4,85 mm · Ø zewn. 5,6 mm · Ø kołnierza 6,0 mm
C-032-000002 SLV-03		Tulejka stopująca do pinowania Ø wewn. 1,5 mm · Ø zewn. 2,4 mm · Ø kołnierza 2,8 mm
C-032-000013		Pin mocujący Ø 1,5 mm
C-032-000014		ICX-Magellan standardowy przenośnik implantów TYLKO DLA BONE LEVEL
C-032-000015		ICX-Magellan standardowy przenośnik do implantów TYLKO DLA TISSUE LEVEL
C-032-000020		Wiertło do nawiercania otworów pod piny Ø 1,5 mm
C-032-000021		Wiertło pilotujące nr 1
C-032-000006		Uniwersalna tulejka stopująca Ø wewn. 2,2 mm · Ø zewn. 2,95 mm · Ø kołnierza 3,3 mm
C-015-100025		Klucz sześciokątny 1,4 mm ręczny średni 24 mm standardowy do śrub oraz łączników
C-032-000022		Wiertło pilotujące nr 2 L=6,5 mm NIE DLA ICX-PLUS Ø 3,45 mm
C-032-022110		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,2 mm, do 10 mm
C-032-022150		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,2 mm, do 15 mm
C-032-020110		Wiertło uniwersalne pilotujące Ø 2,0 mm, do 10 mm
C-032-000007		Klucz redukcyjny do wiertła Ø 2,0 mm
C-015-110020		C-015-110020 - Insertion instrument screwable ISO-shank +2.0mm
C-032-000017		Przenośnik implantów TL z mikrokulką TYLKO DLA TISSUE LEVEL
C-032-000016		Przenośnik implantów BL z mikrokulką TYLKO DLA BONE LEVEL
C-018-100019		Magellan Bone Spreader Box filled
C-018-000019		Magellan Bone Spreader Box unfilled

Nr artykułu	Artykuł	
C-032-000023		Tuleja do nawigacji implantów ICX 3.3mm
C-032-000024		Pierwsze wiertło pilotujące do nawigacji implantów ICX 3.3mm
C-032-000025		Drugie wiertło pilotujące do nawigacji implantów ICX 3.3mm
C-032-000009		Pin do stabilizacji szablonu
C-015-100000		Przenośnik przykręcany do implantu
C-015-110000		Przenośnik przykręcany do implantu na kątnicę
N-015-110000		Element łączący, używać z przenośnikiem C-015-110000
N-015-110020		Przenośnik przykręcany do implantu 3.3 na kątnicę +2.0mm
N-015-110025		Przenośnik przykręcany do implantu 3.3 na kątnicę +2.5mm

Zestaw narzędzi do rozszczepiania wyrostka zębodołowego. Do zastosowania także z użyciem szablonu ICX-Magellan.

Symbol	Opis	Materiał	
C-032-100001	ICX Kaseta Chirurgiczna kompletna	Tworzywo	
C-014-600001	wiertło ICX-Magellan BoneSpreader Nr. 1: Ø 1 = 1,2mm · Ø 2 = 2,5mm L = 8mm ,	Tytan	
C-014-600002	wiertło ICX-Magellan BoneSpreader Nr. 2: Ø 1 = 1,8mm · Ø 2 = 3,5mm L = 10mm,	Tytan	
C-014-600003	wiertło ICX-Magellan BoneSpreader Nr. 3: Ø 1 = 2,5mm · Ø 2 = 3,8mm L = 10mm,	Tytan	
C-014-600004	wiertło ICX-Magellan BoneSpreader Nr. 4: Ø 1 = 2,6mm · Ø 2 = 4,15mm L = 10mm,	Tytan	
960001	ICX Raczeta	Stal chirurgiczna	
960007	ICX Adapter uniwersalny	Stal chirurgiczna	
C-021-000002	ICX Klucz do łączników litych	Stal chirurgiczna	
C-032-020110	ICX-Magellan uniwersalne wiertło pilotujące Ø2,0	Stal chirurgiczna	

SZABLONY IMPLANTOLOGICZNE ICX

System ICX-MAGELLAN to cyfrowe rozwiązanie 3D do projektowania, planowania i wykonywania w pełni nawigowanych zabiegów implantacji z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych.

Wszystko zaczyna się od analizy cyfrowej przypadku pacjenta i precyzyjnego planowania leczenia. Następnie po zatwierdzeniu projektu przez lekarza produkowany jest szablon chirurgiczny.

Szablony chirurgiczne produkowane są przez bardzo dokładne drukarki 3D. Szablony drukujemy w Polsce w laboratorium protetycznym.

Ustalony ekonomiczny poziom cen pozostaje niezmienny dla każdego szablону chirurgicznego ICX-Magellan, który zawiera do 14 tytanowych tulei i do 6 pinów mocujących.



**Szablony implantologiczne ICX wykonasz
w laboratorium protetycznym OPENLAB 3Z.**



openlab.3z.pl



OpenLab3Z to cyfrowe laboratorium CAD/CAM, które w kompleksowy sposób pozwala na wykonanie uzupełnień protetycznych od momentu planowania implantów do uzupełnień stałych.

Za pomocą programu ICX Magellan X planujemy i tworzymy szablony chirurgiczne do druku 3D, a w pakiecie SmileBox obok szablonu oferujemy też frezowany most tymczasowy.

W laboratorium zaplanujemy także wirtualny uśmiech DSD do druku 3D, wykonamy uzupełniania czasowe i stałe na frezowanych łącznikach indywidualnych lub bazach Ti.

Przyjmujemy zamówienia od techników dentystycznych na frezowane konstrukcje protetyczne z metalu, cyrkonu i innych materiałów dentystycznych, a także druku 3D.



Openlab 3Z oferuje frezowanie łączników indywidualnych dla każdego połączenia ICX: TISSUE LEVEL, STANDARD, NARROW.




ICX-IMPERIAL IN A SMILE BOX

ICX-Imperial to nowoczesna koncepcja leczenia implantologicznego, dająca lekarzowi „wszystko w jednym rozwiązaniu”. System leczenia składa się z modułów planowania zabiegu przy użyciu programu ICX-Magellan, szablonów implantologicznych ICX, a także prefabrykowanych indywidualnych elementów tymczasowych ICX-Smilebridge.

Na podstawie precyzyjnych trójwymiarowych danych, w połączeniu z wiedzą techniczną i symulacją komputerową położenia implantów, możliwe jest zaplanowanie złożonych zabiegów, np. wszczepienia natychmiastowego implantów po usunięciu zębów lub po odbudowie kości oraz zaproponowanie pacjentowi natychmiastowych tymczasowych rozwiązań protetycznych. Przy wykorzystaniu mostów przykręcanych, musi zostać zapewniona podstawowa stabilizacja pierwotna implantu (³ 35 Ncm) oraz zblokowanie implantów.



medentis
medical

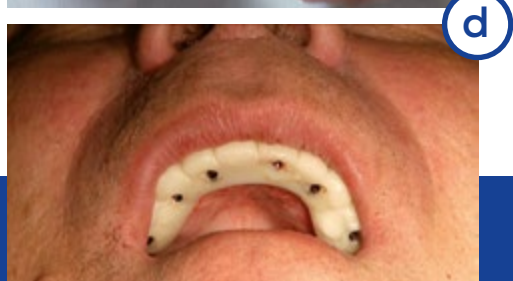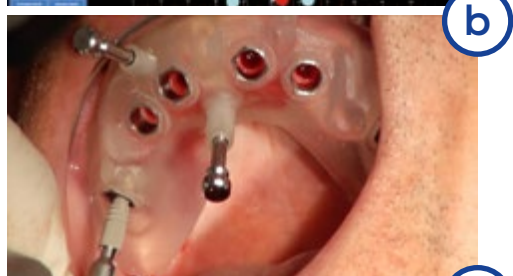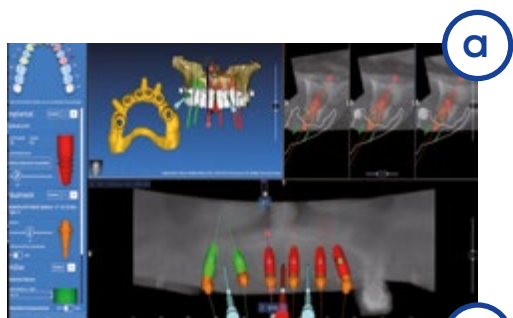

Korzystając z **ICX-IMPERIAL** **IN A SMILE BOX** otrzymujesz:

- Planowanie zabiegu w oprogramowaniu **3D ICX-Magellan X**.
- Do trzech szablonów implantologicznych **ICX-MAGELLAN** i wydrukowany model diagnostyczny 3D.
- Wszystkie niezbędne implanty (**ICX-PREMIUM** lub **ICX-ACTIVE**) oraz łączniki **ICX-MULTI unit**, tytanowe łączniki protetyczne.
- Frezowaną odbudowę tymczasową, indywidualny prefabrykowany, wielokolorowy most z PMMA, możliwy do zastosowania w jamie ustnej do nawet ponad 12 miesięcy.


- Całkowita pewność diagnostyczna, dzięki obrazowaniu 3D,
- Przewidywalne wyniki, dzięki oprogramowaniu do planowania implantów 3D,
- Unikanie dodatkowych operacji,
- Skrócony czas leczenia i zabiegu implantologicznego,
- Mniejszy obrzęk pooperacyjny u pacjenta,
- Zęby stałe po operacji* odpowiadające życzeniom pacjenta pod względem funkcji i estetyki.

Korzyści ze stosowania
kompletnego rozwiązania
implantologicznego
ICX-IMPERIAL
to:

*Pod warunkiem wystarczającej stabilności pierwotnej.


ICX-NARROW

Wąski implant o średnicy 3,3 mm, stosowany w sytuacjach o bardzo ograniczonej przestrzeni w wyrostku zębodołowym. Wąska linia implantów ICX-Narrow kontynuuje tę samą wysoką jakość i precyzję połączenia łącznika i implantu, będącą podstawą gamy produktów ICX. Dostępny w trzech wysokościach: 8, 10, 12,5 mm.

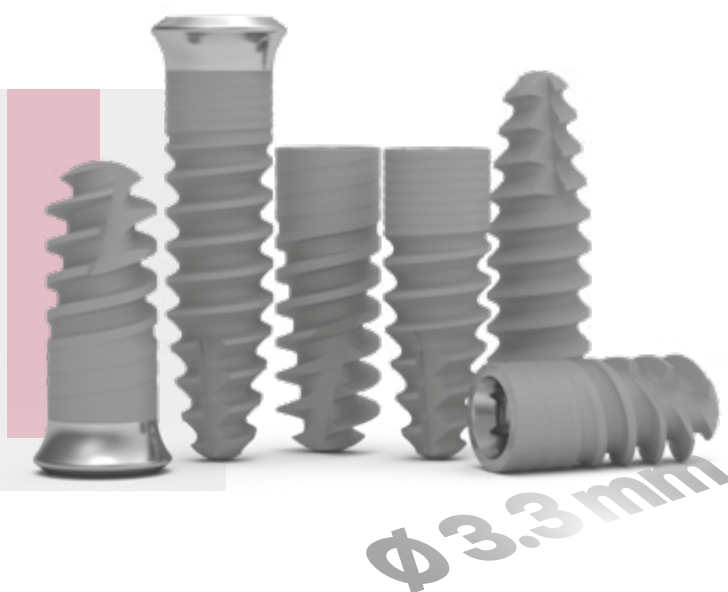


Znakomite cechy implantów ICX-NARROW Ø 3,3 MM

Wąskie implanty ICX-PREMIUM i wąskie implanty ICX-ACTIVE-MASTER o średnicy 3,3 mm otwierają całkowicie nowe horyzonty w dziedzinie implantacji o zmniejszonej średnicy!

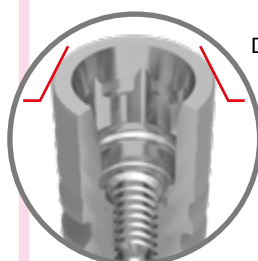

Do rodziny implantów ICX dołącza implant o zmniejszonej średnicy. Typowe dla ICX połączenie implant-łącznik, zyskuje dodatkowe wskazania przy zachowaniu tej samej wysokiej jakości i precyzji. Gwarantuje to nowa linia protetyczna.

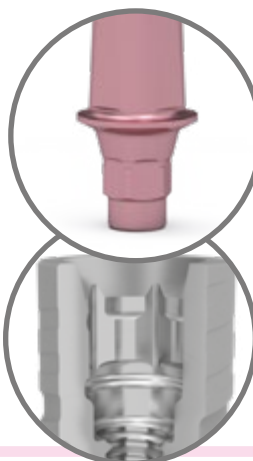

Celem producenta było stworzenie implantu, który można stosować w obszarach o bardzo ograniczonej przestrzeni bez konieczności rezygnacji ze stabilności.

Implanty ICX-PREMIUM oraz ICX-ACTIVE-MASTER o średnicy jedynie 3,3 mm, pozwalają na zastosowanie implantów w miejscach, w których wcześniej nie było to możliwe.

UWAGA:

Implanty ICX-PREMIUM Ø 3.3mm i ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm **współpracują z elementami protetycznymi linii ICX Narrow.**

Implanty ICX-NARROW Ø 3.3mm mają inne gniazdo protetyczne względem gniazda protetycznego linii ICX-PREMIUM & ICX-ACTIVE: żółta Ø 3.45mm, czerwona Ø 3.75mm, zielona Ø 4.1mm, niebieska Ø 4.8mm.

Implanty ICX-NARROW Ø 3.3mm mają własną linię elementów protetycznych w kolorze różowym!




ICX-PREMIUM Ø 3,3mm implanty (BL)

Nr artykułu

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 8mm
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 10mm
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

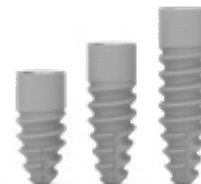


ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm implanty (BL)

Nr artykułu

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 8mm
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 10mm
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

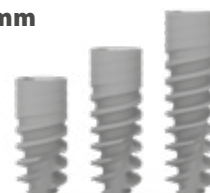


ICX-PREMIUM Ø 3,3mm implanty (TL)

Nr artykułu

T-001-330080	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 8mm
T-001-330100	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 10mm
T-001-330125	ICX-Premium Tissue Line Ø 3.3mm x 12.5mm

Ø 3,3mm

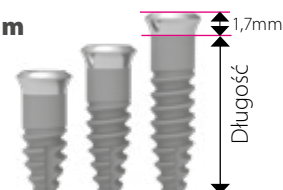


ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm implanty (TL)

Nr artykułu

TAM-001-330080	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 8mm
TAM-001-330100	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 10mm
TAM-001-330125	ICX-Active-Master Tissue Line Ø 3.3mm x 12.5mm


Ø 3,3mm

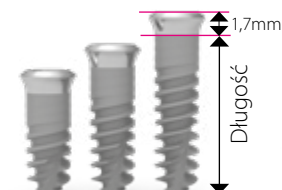

WIERTŁA ICX-PREMIUM, ICX-ACTIVE-MASTER


WAŻNA UWAGA!

W przypadku wiertła ICX-ACTIVE-MASTER oraz wiertła ICX-PREMIUM, długość wiertła jest o 0,3 mm dłuższa, ze względu na końcówkę – należy upewnić się, że ta dodatkowa długość jest bezpieczna podczas pracy dla ważnych struktur anatomicznych.

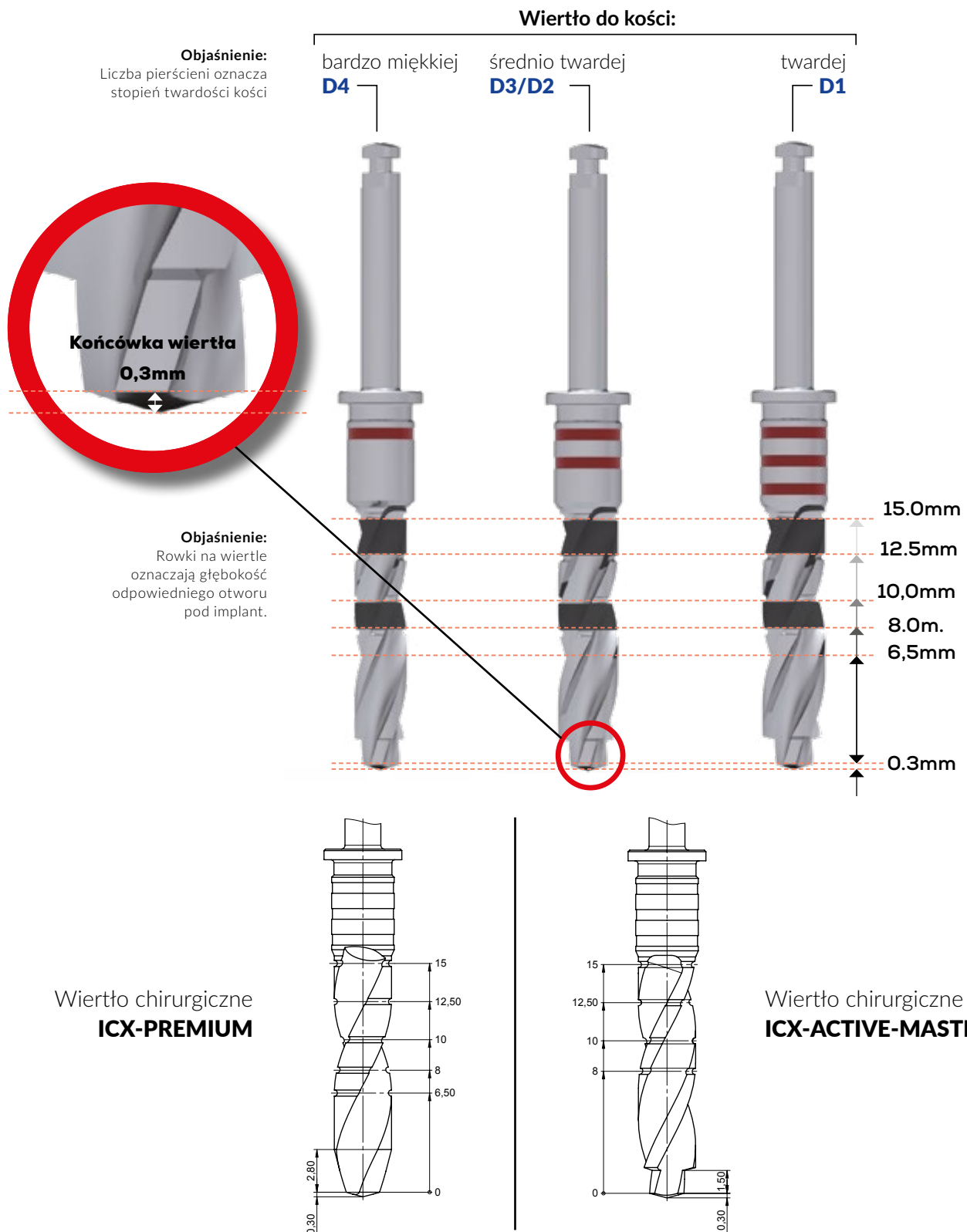

WAŻNA UWAGA!

W przypadku wiertel ICX-Ø3,3 mm długość wiertła jest o 0,3 mm dłuższa
ze względu na dłuższą o 0,3 mm końcówkę wiertła – należy upewnić się,
że dodatkowa głębokość otworu jest dopuszczalna w obszarze ważnych struktur anatomicznych.

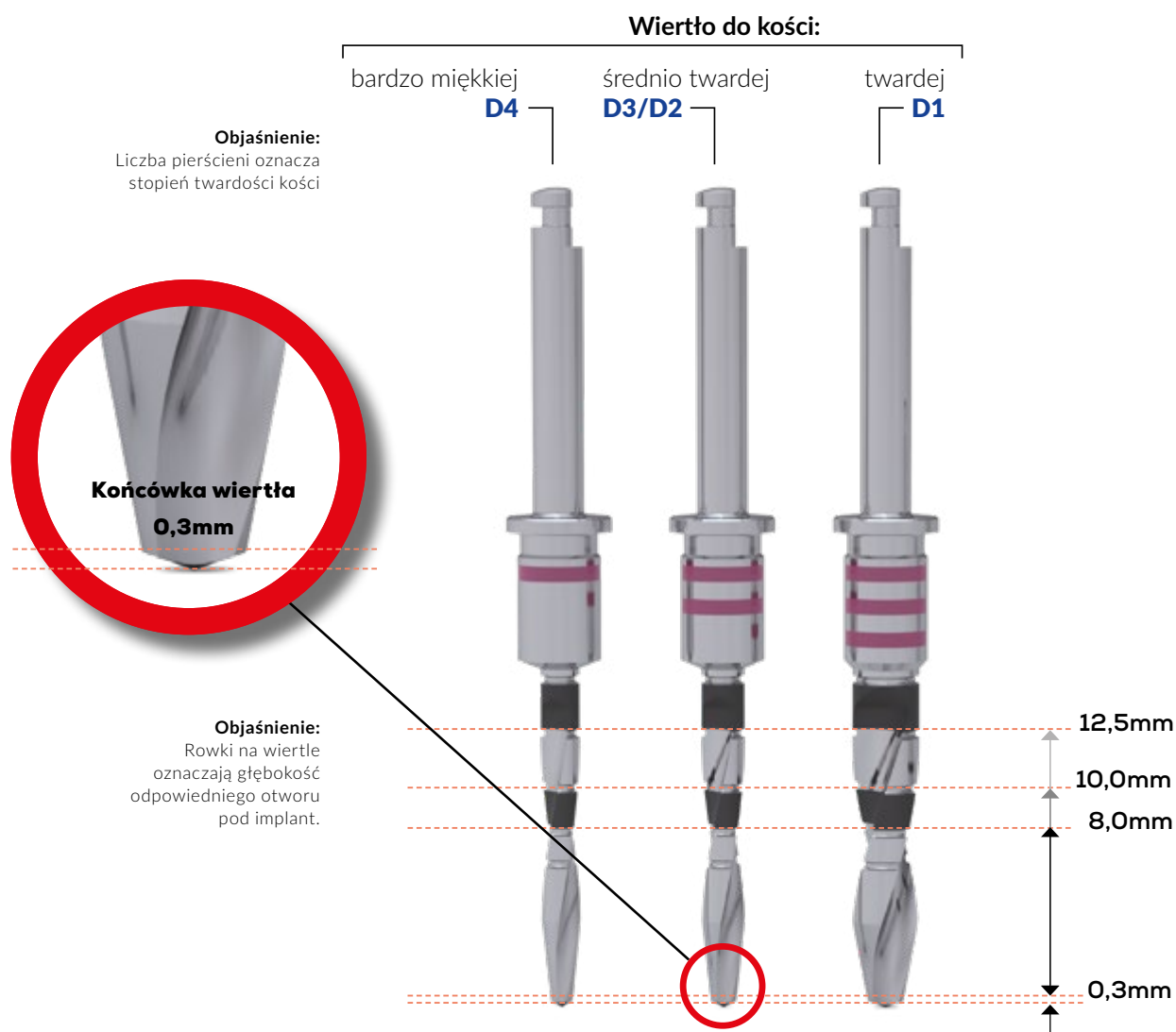



IMPLANTY ICX-BL BONE LEVEL / ICX-TL TISSUE LEVEL

UWAGA! :

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dwie różne platformy protetyczne (**BL** i **TL**) w momencie pobierania wycisków.

Przekazując wycisk do pracowni protetycznej, poinformuj technika o zamówieniu odpowiedniego analogu laboratoryjnego **BL** lub **TL**.

Jest to bardzo ważne, w przypadkach kiedy korony protetyczne będą osadzone na łącznikach o niskim profilu wyłaniania (GH 0mm).

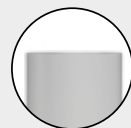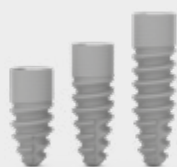

Artykuł: N-006-010003

ICX-Ø 3,3mm BL
(Bone Level) Ø 3,3mm



Artykuł: N-006-010008

ICX-Ø 3,3MM TL
(Tissue Level) Ø 3,3mm

Przenośniki implantów

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-015-100002	ICX -NARROW Ø 3.3 przenośnik do implantów średni	L = 28,5mm	Stal chirurgiczna	
N-015-100040	ICX -NARROW Ø 3.3 przenośnik do implantów średni, z zamkiem blokującym	L = 28,5mm	Stal chirurgiczna	

ICX profiler do kości dla ICX-NARROW Ø 3.3 BL

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
G-014-006003	Profiler do kości dla implantów ICX 3.3 BL. Przeznaczony jest do odsłaniania implantów po okresie wgajania	L = 28mm	Stal chirurgiczna	

UWAGA: Używać wyłącznie do implantów ICX-NARROW Ø 3.3mm

Klucze protetyczne

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
G-015-100033	Klucz protetyczny 1.2mm	L = 25mm	Stal chirurgiczna	
G-015-100030	Klucz protetyczny 1.2mm jednoczęściowy, średni	L = 27mm	Stal chirurgiczna	
G-015-100036	Klucz protetyczny 1.2mm jednoczęściowy, długi	L = 32mm	Stal chirurgiczna	

ICX-Ø 3.3mm ŚRUBY GOJĄCE I TRANSFERY WYCISKOWE

ICX-NARROW śruby zamykające i śruby gojące

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-003-000001	ICX Ø 3.3 Śruba zamykająca	GH 0mm	Tytan	
N-003-000002	ICX Ø 3.3 Śruba zamykająca jałowa	GH 0mm	Tytan	
N-003-000021	ICX Ø 3.3 Śruba zamykająca 2mm	GH 2mm	Tytan	
N-004-004120	ICX Ø 3.3 Śruba gojąca stożkowa, 2mm	GH 2mm Ø 4,1	Tytan	
N-004-004130	ICX Ø 3.3 Śruba gojąca stożkowa, 3mm	GH 3mm Ø 4,1	Tytan	
N-004-004140	ICX Ø 3.3 Śruba gojąca stożkowa, 4mm	GH 4mm Ø 4,1	Tytan	
N-004-004150	ICX Ø 3.3 Śruba gojąca stożkowa, 5mm	GH 5mm Ø 4,1	Tytan	

Transfery wyciskowe i analogi implantów

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-005-020002	ICX Ø 3.3 Transfer wyciskowy do łyżki zamkniętej 3-częściowy	H 10,4mm Ø 4,5	Tytan	
N-005-030001	ICX Ø 3.3 Transfer wyciskowy do łyżki otwartej 2-częściowy, krótki	H 8,5mm Ø 4,5	Tytan	
N-005-030002	ICX Ø 3.3 Transfer wyciskowy do łyżki otwartej 2-częściowy, długi	H 15mm Ø 4,5	Tytan	
N-006-010003	ICX Ø 3.3 Analog implantu BL Bone Level CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Tytan	
N-006-010008	ICX Ø 3.3 Analog implantu TL Tissue Level CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Tytan	

Uwaga: Nie należy przekraczać momentu dokręcania od 5 do 10 Ncm. Wszystkie śruby zamykające ICX i śruby gojące należy wkręcać wyłącznie ręcznie. Jeśli element zostanie dokręcony z siłą 20 Ncm lub więcej, to istnieje ryzyko powstania sił stożkowych, które uniemożliwią ich późniejsze odkręcenie.

Uwaga: H = Wysokość od stopnia implantu - GH = Gingival height - Wysokość śluzówki



ICX-Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI TYTANOWE

ICX-NARROW Łączniki tytanowe proste

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-007-020401	ICX Ø 3,3 łącznik prosty, 1mm	GH 1mm Ø 4,0 K 5,5mm	Tytan	
N-007-020402	ICX Ø 3,3 łącznik prosty, 2mm	GH 2mm Ø 4,0 K 5,5mm	Tytan	
N-007-020403	ICX Ø 3,3 łącznik prosty, 3mm	GH 3mm Ø 4,0 K 5,5mm	Tytan	

ICX-NARROW Łączniki tytanowe kątowe


Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-010-020010	ICX Ø 3,3 Łącznik kątowy 15°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Tytan	
N-010-020020	ICX Ø 3,3 Łącznik kątowy 15°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 4mm Ø 4,0 K 7,4mm	Tytan	
N-010-040010	ICX Ø 3,3 Łącznik kątowy 25°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Tytan	
N-010-040020	ICX Ø 3,3 Łącznik kątowy 25°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 4mm Ø 4,0 K 7,4mm	Tytan	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-011-000001



Dostępna śruba laboratoryjna
N-007-000002

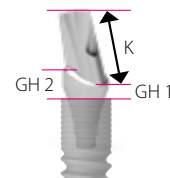

Śruby łączące do łączników

Nr artykułu	Artykuł	Materiał	
N-011-000001	ICX Ø 3.3 śruba łącząca Hex 1.2mm	Tytan	
N-007-000002	ICX Ø 3.3 śruba łącząca Hex 1.2mm	Tytan	

ICX-Ø 3.3mm CERICX Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI HYBRYDOWE

Kolor zęba
„jasny” — **A**
zbliżony do:
A1, A2, B1

Kolor zęba
„standard” — **B**
zbliżony do:
A3, B2

Kolor zęba
„ciemny” — **C**
zbliżony do:
A3,5/B3

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-036-A/B/C 10501	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik prosty 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Tytan	A = Kolor zęba „jasny”  B = Kolor zęba „standard”  C = Kolor zęba „ciemny” 
N-036-A/B/C 10502	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik prosty 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Tytan	
N-036-A/B/C 10503	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik prosty 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Tytan	
N-036-A/B/C 10504	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik prosty 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Tytan	
N-036-A/B/C 10505	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik prosty 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Tytan	A = Kolor zęba „jasny”  B = Kolor zęba „standard”  C = Kolor zęba „ciemny” 
N-036-A/B/C 20005	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik 15° kątowny 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Tytan	
N-036-A/B/C 20015	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik 15° kątowny 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Tytan	
N-036-A/B/C 20025	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik 15° kątowny 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Tytan	
N-036-A/B/C 20035	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik 15° kątowny 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Tytan	
N-036-A/B/C 20045	ICX Ø 3,3 CERICX łącznik 15° kątowny 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Tytan	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-011-000001

ICX-Ø 3.3mm CERICX Ø 3.3mm ŚRUBY GOJĄCE

CERICX Ø 3.3 śruby gojące

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	NOWOŚĆ!
N-004-116003	ICX-3.3 CerICX śruba gojąca	Ø=7 GH=3mm	Tytan	
N-004-116004	ICX-3.3 CerICX śruba gojąca	Ø=7 GH=4mm	Tytan	
N-004-116005	ICX-3.3 CerICX śruba gojąca	Ø=7 GH=5mm	Tytan	

Łączniki do prac przykręcanych i do skanowania CAD/CAM

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
NOWOŚĆ! N-029-000001	ICX-3.3 Baza tytanowa	Ø=3.6mm GH=0,5mm K=3,5mm	Tytan	
N-030-000003	ICX Ø 3,3 Łącznik do skanowania	H 11,5mm Ø 4,1	Tytan	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-011-000001

Łącznik chromo-kobaltowy CoCr

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
NOWOŚĆ N-008-020001	ICX-CoCr łącznik do napalania z tuleją z tworzywa modelującego kanał prowadzący, hex	Ø 3,6mm GH: 0,5mm K: 5mm Tuleja z tworzywa: 9mm	CoCr Biodur + tworzywo do wypalania (zwrócić uwagę na wartości CTE podczas wypalania ceramiki)	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-011-000001

ICX-Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI ICX-MULTI 4-ON-ICX / 6-ON-ICX

ICX-MULTI®- Łączniki


Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-020-750010	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik prosty 1mm	K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-750020	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik prosty 2mm	K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-750030	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik prosty 3mm	K 2,2mm GH 3mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-751710	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 17° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 2,4mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-751720	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 17° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 3,6mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-751730	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 17° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 4,6mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-753510	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 35° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 3,75mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-753520	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 35° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 4,75mm Ø 4,8	Tytan	
N-020-753530	ICX Ø 3,3 MULTI łącznik kątowy 35° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 5,75mm Ø 4,8	Tytan	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-020-000010

Uwaga:

GH = Wysokość słuzówki
K = Wysokość łączenia protetycznego

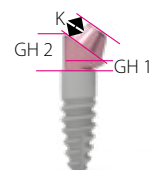

**ICX-Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI ICX-MULTI 4-ON-ICX / 6-ON-ICX****Jedna platforma multiunit dla implantów ICX z połączeniem NARROW (3.3 mm) oraz REGULARNYM.**

Minimalna wysokość konstrukcji protetycznej wynosi 5.5mm

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał
C-003-000005	 ICX-MULTI Czapeczka ochronna	Ø 4,8 L 4,6mm	Tytan
C-005-070001	 ICX-MULTI Transfer wyciskowy zamknięty, 3-częściowy	L 11mm	Tytan
C-005-070002	 ICX-MULTI Transfer wyciskowy otwarty, 2-częściowy, krótki, zawiera plastikową osłonkę	L 13mm	Tytan
C-005-070020	 ICX-MULTI Transfer wyciskowy otwarty, 2-częściowy, długi, zawiera plastikową osłonkę	L 16,7mm	Tytan
C-006-010007	 ICX-MULTI Analog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Tytan
C-020-951120	 ICX-MULTI Tuleja tytanowa	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Tytan
C-020-952120	 ICX-MULTI Tuleja z tworzywa do wypalania	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Tworzywo do wypalania
C-020-953120	 ICX-MULTI Tuleja z tworzywa PEEK (DO PRAC TYMCZASOWYCH)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek
C-029-002010	 ICX-MULTI podstawa do cementowania ze stopniem	Ø 4,8 L 5,5mm	Tytan
C-029-002011	 ICX-MULTI podstawa do cementowania 0mm	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Tytan
C-030-000010	 ICX-MULTI Baza do skanowania	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek
C-030-000013	 ICX Multi Podstawa skanowania wąska	Ø 4,10mm L 10mm	Tytan
C-031-100001	 ICX-Maximus-łącznik typu Locator GH 3mm, (doliczyć wysokość łącznika bazowego ICX-MULTI)	Ø 4,8 L 4,4mm	Tytan



Elementy protetyczne ICX-MULTI zawierają śrubę łączącą C-020-000011

ICX-Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI ICX-MULTI 4-ON-ICX / 6-ON-ICX

ICX-MULTI® – klucze

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
C-015-100030	ICX-MULTI klucz sześciokątny 1,2mm średni	SW 1,2mm	Stal chirurgiczna	
C-020-000001	ICX-MULTI klucz nasadkowy 3,2mm do łączników prostych	SW 3,2mm	Stal chirurgiczna	

ICX-MULTI® – łączniki

Wymagalna minimalna wysokość konstrukcji protetycznej to 5.5mm

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał
C-020-956120	 ICX-MULTI łącznik protetyczny do napalania CoCr Biodur	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/BC
C-020-955120	 ICX-MULTI WeldOn łącznik do spawania kilku nadbudów, za pomocą drutu tytanowego	Ø 4,8mm L 12mm	Tytan
C-020-955121	 ICX-MULTI WeldOn łącznik do spawania kilku nadbudów, za pomocą drutu tytanowego	Ø 5,1mm L 10,5mm	Tytan



Zawiera śrubę łączącą C-020-000011
(śruba łącząca do ICX-MULTI)

Zakres zastosowania i wskazania

Koncepcja ICX-multi® to koncepcja protetyczna do natychmiastowej odbudowy bezzębnych pacjentów, w celu lepszego podparcia uzupełnienia protetycznego możliwe jest umieszczenie implantów dystalnych pod kątem 17° lub 35°.

Wychylenia te są kompensowane przez łączniki kątowe ICX-MULTI.



ICX-Ø 3.3mm ŁĄCZNIKI T-BONA / ICX-MAXIMUS

t-bona łącznik kulowy

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-022-060001	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 1mm	GH 1mm	Tytan	
N-022-060002	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 2mm	GH 2mm	Tytan	
N-022-060003	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 3mm	GH 3mm	Tytan	

ICX-Maximus łącznik typu Locator

Nr artykułu	Artykuł	Wymiary	Materiał	
N-031-010002	ICX-NARROW Ø 3,3 Łącznik Maximus, 2-częściowy, 2mm	GH 2mm	Tytan	
N-031-010003	ICX-NARROW Ø 3,3 Łącznik Maximus, 2-częściowy, 3mm	GH 3mm	Tytan	



Wszystkie łączniki zawierają śrubę łączącą
N-011-000001

ICX-Ø 3.3mm ICX-T-BONA SYSTEM KULOWY

t-ecco/matryce

Nr artykułu	Artykuł	Materiał
T-13825	 t-ecco, matryca, kompletna, w tym złota wkładka wewnętrzna, czerwony plastikowy pierścień ochronny	Tytan plus AuPt
T-13836	 t-ecco, matryca zewnętrzna, bez wewnętrznej matrycy	Tytan
T-13833	 t-ecco, wewnętrzna matryca złota, z regulacją	AuPt
T-13846	 t-ecco, wewnętrzna matryca żółta, słaba	Tytan Klasa 5
T-13845	 t-ecco, wewnętrzna matryca czerwona, mocna	Tytan Klasa 5
EK-833100	 Analog	Mosiądz
T-10571	 Aktywacja Deaktywacja t-ecco aktywator / deaktywator	Stal chirurgiczna
960002	 Klucz sześciokątny 0.9mm, L 20mm	Stal chirurgiczna
C-015-100029	 Klucz sześciokątny 0.9mm, długi, jednoczęściowy L 35mm	Stal chirurgiczna

Dalbo®-PLUS/matryce


Nr artykułu	Artykuł	Materiał
DP-055890	 Matryca Dalbo PLUS TE, kompletna, w tym Wkład lamelowy Dalbo PLUS	Tytan plus Elitor
DP-055643	 Wkład lamelowy Dalbo PLUS (bez wcięcia)	Elitor
DP-050068	 Mięka wkładka lameli Dalbo PLUS Tuning (1 wcięcie) do wytartej główki kuli do 0,05 mm	Elitor
DP-055687	 Dalbo PLUS Wkładka do listwy tuningowej (2 wcięcia) do wytartej główki kulki od 0,05 mm	Elitor
DP-072609	 Narzędzie/aktywator Dalbo PLUS (co ¼ obrotu wzrasta siła retencji o 200g)	Stal chirurgiczna

Uwaga: Upewnij się, że używasz narzędzia Dalbo-PLUS (DP-072609) w celu indywidualnego dostosowania retencji w zależności od sytuacji.

ICX-Ø 3.3mm ICX-MAXIMUS – AKCESORIA

Ta sama średnica kulki dla wszystkich implantów ICX.

ICX-Maximus Akcesoria:

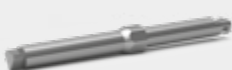Nr artykułu	Artykuł	Materiał
C-031-852400	 Bezbarwna wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 2.3 kg, silna, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852700	 Różowa wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 1.6 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852900	 Niebieska wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 0.7 kg, słaba, Kompensacja rozbieżności $\pm 10^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-854700	 Zielona wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 1.8 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 20^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-854800	 Czerwona wkładka retencyjna Siła zatrzasku około 0.4 kg, średnia, Kompensacja rozbieżności $\pm 20^\circ$	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-851500	 Czarna wkładka retencyjna, brak retencji (laboratoryjna)	Tworzywo (pakiet 4 szt.)
C-031-852300	 ICX-Maximus blokujący element dystansowy	Tworzywo (pakiet 2 szt.)
C-031-851902	 Matryca do protezy - zestaw (tytanowa czapka z czarnym wkładem laboratoryjnym, pierścień dystansowy i wkładki retencyjne)	Tytan/ Tworzywo (pakiet 2 szt.)
C-031-851910	 Matryca do protezy - zestaw (tytanowa czapka z czarnym wkładem laboratoryjnym, pierścień dystansowy i wkładki retencyjne)	Tytan/ Tworzywo (pakiet 10 szt.)
C-015-100032	 Narzędzie wielofunkcyjne do systemu ICX-MAXIMUS	Stal chirurgiczna
C-031-850501	 Transfer wyciskowy	Tytan (pakiet 4 szt.)
C-031-853000	 Analog ICX-MAXIMUS 04mm	Tytan (pakiet 4 szt.)
C-015-100018	 Trójkąny klucz do łączników ICX-MAXIMUS, krótki, 25mm	Stal chirurgiczna
C-015-100031	 Trójkąny klucz do łączników ICX-MAXIMUS, długi, 30mm	Stal chirurgiczna

Łączniki jedno- i dwuczęściowe ICX Maximus są własnością firmy Medentis Medical i są kompatybilne z łącznikami Locator™. **Dostępne są dla wszystkich implantów ICX.**

Produkty oznaczone ® i ™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiedniego producenta.

medentis
medical

Implanty dwuczęściowe, przeznaczone do stabilizacji ruchomych rozwiązań protetycznych. Po zdemontowaniu łącznika kulowego, możliwe jest zastosowanie systemu LOCATOR™ (ICX-Maximus) lub wcementowanie specjalnej czapeczki protetycznej do osadzania pojedynczych koron.

ICX-MINI Implant Ø 2.9mm

Implant ICX-MINI - kolor biały, **Ø 2,9mm**


Nr katalogowy

C-001-290080 ICX-MINI Ø 2,9 x 8mm

C-001-290100 ICX-MINI Ø 2,9 x 10mm

C-001-290125 ICX-MINI Ø 2,9 x 12,5mm

Uwaga: Używać wyłącznie śruby zamykającej
ICX-mini C-003-000004!

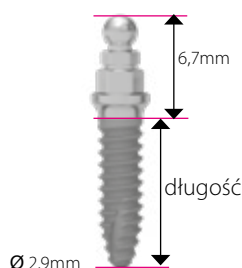

Przenośnik implantu:
C-015-100006

Klucz kontrolny do demontażu
łącznika kulowego: C-015-100009

Przenośnik łącznika kulowego:
C-015-100007

Śrubokręt typu hex: 960002
Do śrub zamykających



Przegląd elementów protetycznych ICX-MINI Ø 2,9mm

Nr katalogowy	Opis produktu	Wymiary	Materiał
C-003-000004	ICX-MINI śruba zamykająca (sprawdzić uwagę poniżej!) Do przykręcania służy klucz nr 960002	–	Tytan
C-022-090001	t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog	GH 1mm	Tytan
C-022-090002	t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog	GH 2mm	Tytan
C-022-090003	t-bona łącznik kulowy MINI, Ø 2.25mm, łącznik w zestawie zawiera analog	GH 3mm	Tytan
C-026-010501	ICX-MINI łącznik lity (Lita czapeczka jest zacementowana w ustach pacjenta. łącznik po zacementowaniu może być frezowany i konwencjonalnie pobrany z niego wycisk do laboratorium).	Ø 5mm K 7mm	Tytan

Uwaga: Nie należy przekraczać momentu dokręcania od 5 do 10 Ncm. Wszystkie śruby zamykające ICX-mini należy dokręcać wyłącznie ręcznie. Jeśli śruba zostanie zakręcona z siłą 20 Ncm lub więcej, istnieje ryzyko, że powstaną siły stożkowe, które uniemożliwią ich późniejsze odkręcenie.

Uwaga: GH = Gingival height (Wysokość śluzówki); K= wysokość części protetycznej

ICX Maximus łącznik typu Locator™ ICX-MINI Ø 2.9mm*

Nr katalogowy	Opis produktu	Materiał
C-031-030001	ICX-Maximus dla implantu ICX-MINI, zawiera tuleję o wys. GH 3mm oraz śrubę łączącą	Tytan

* Dwuczęściowy łącznik ICX Maximus jest autorskim opracowaniem firmy Medentis Medical i jest kompatybilny z matrycami LOCATOR™.

ICX-WHITE



ICX-WHITE

Implanty ceramiczne, wykonane z tlenku cyrkonu ZrO₂, stabilizowanego itrem (Y-TZP).

Wyjątkowa estetyka i trwała stabilność zębów przednich i bocznych. Całkowicie biozgodne – nie zawierają nawet śladowych ilości metali.


Skuteczne rozwiązanie implantoprotetyczne dla pacjentów wykazujących alergię na metale.

ICX-ACTIVE-WHITE-Implanty pełnocyronowe


Nr artykułu

AW-002-425080	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 8mm, jednoczęściowy, GH 2.5mm , K 4.5mm
AW-002-425100	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 10mm, jednoczęściowy, GH 2.5mm , K 4.5mm
AW-002-425125	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 12.5mm, jednoczęściowy, GH 2.5mm , K 4.5mm
AW-002-425150	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 15mm, jednoczęściowy, GH 2.5mm , K 4.5mm
AW-002-426080	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 8mm, jednoczęściowy, GH 4.5mm , K 4.5mm
AW-002-426100	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 10mm, jednoczęściowy, GH 4.5mm , K 4.5mm
AW-002-426125	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 12.5mm, jednoczęściowy, GH 4.5mm , K 4.5mm
AW-002-426150	ICX-ACTIVE WHITE-Implant Ø 4.1 x 15mm, jednoczęściowy, GH 4.5mm , K 4.5mm

GH 2,5mm
Ø 4,1mm

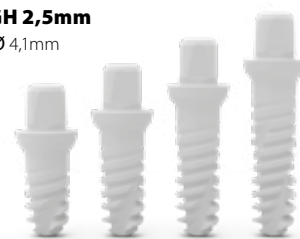

GH 4,5mm
Ø 4,1mm

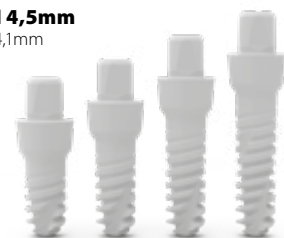

UWAGA: GH = Gingiva height

C-021-000002

ICX przenośnik implantu
dla ICX-ACTIVE WHITE



L 25,6mm

Stal chirurgiczna

icx.com.pl

icx.com.pl

icx.com.pl

icx.com.pl

ICX

Das FAIRE Premium-Implantat-System



Medical Smart
Solutions



Medical Smart
Solutions

Wyłączny dystrybutor
systemu implantologicznego ICX w Polsce:

3Z Sp. z o.o.

ul. Stara 7, 41-940 Piekary Śląskie

Tel.: **+48 32 767 70 70 / +48 32 767 55 66**

E-mail: **zamowienia@3z.pl**

icx.com.pl

sklep.3z.pl